

# Ambu® Redi-ACE & Redi-ACE Mini



## Die wichtigsten Vorteile

- **Einfache Anwendung**  
Die Ambu Redi-ACE besitzt eine automatisch ausklappbare Kinnstütze und zwei Verriegelungsknöpfe. Sie wird dem Patienten in nur drei Schritten angelegt: Größenbestimmung - Verriegeln - Platzierung
- **2 Zervikalstützen für alle Patienten**  
Mit 8 Größeneinstellungen der Redi-ACE und 6 Größeneinstellungen der Redi-ACE Mini kann der Großteil aller Patienten versorgt werden
- **Praktische Eigenschaften**  
Die flache Bauweise der Ambu Redi-ACE ermöglicht eine einfache Lagerung. Zusätzlich besitzt die Ambu Redi-ACE Befestigungsvorrichtungen zur Sicherung des Sauerstoffschlauchs
- CT, MR und Röntgen kompatibel\*

## Ambu® Redi-ACE & Redi-ACE Mini

Die Ambu Redi-ACE ist eine einzigartig verstellbare Zervikalstütze. In Verbindung mit der Redi-ACE Mini ermöglichen diese beiden Halskrausen zusammen 14 verschiedene Größeneinstellungen, um sicherzustellen, dass es für jeden Patienten eine effektive und akkurate Passform gibt.

Die Zervikalstütze wird komplett flach verpackt und hat eine automatisch ausklappbare Kinnstütze.

Die Ambu Redi-ACE ist eine einstellbare Einweg-Zervikalstütze zur Immobilisierung der Halswirbelsäule.

Die Ambu Redi-ACE besitzt Verriegelungen, die es den Rettungskräften erlauben, die Größe der Zervikalstütze so akkurat wie möglich an den Patientenhals anzupassen. Zwei Verriegelungsknöpfe stabilisieren die Zervikalstütze während der Größeneinstellung.

\*Verzerrungen oder Schatten können abhängig von den Einstellungen des Bildgebungsgerätes auf den Bildern erscheinen.

## Technische Daten

Ambu Redi-ACE	
Justierbare Größen	Halslos, Kurz, Normal, Groß
Einstellungsmöglichkeiten	8 Größeneinstellungen
Abmessungen	554 x 215 x 14 mm
Gewicht	200 g
Farbe	Blau/hellgrau
Röntgen-Transluzenz	CT und MR kompatibel
Lagertemperatur	-30° bis +70° C
Betriebstemperatur	-10° bis +40° C

Ambu Redi-ACE Mini	
Justierbare Größen	Säugling, Kleinkind, kleine Erwachsene
Einstellungsmöglichkeiten	6 Größeneinstellungen
Abmessungen	447 x 188 x 14 mm
Gewicht	100 g
Farbe	Gelb/hellgrau
Röntgen-Durchlässigkeit	CT und MR geeignet
Lagertemperatur	-30° bis +70° C
Betriebstemperatur	-10° bis +40° C



Ambu Redi-ACE



Ambu Redi-ACE Mini

## Material


Produkt	Material
Ambu Redi-ACE	
blau/hellgraues Plastik	Polypropylen
Schaumstoff	IXPE
Ambu Redi-ACE Mini	
gelb/hellgraues Plastik	Polypropylen
Schaumstoff	IXPE




Flache Lagerung

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
472 001 000	Ambu Redi-ACE, Zervikalstütze, 30/Paket
472 002 000	Ambu Redi-ACE Mini, Zervikalstütze, 30/Paket

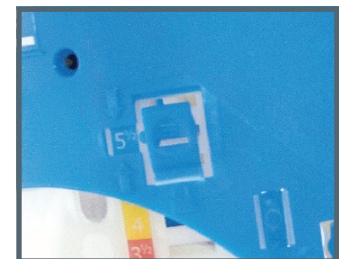

Verriegelung

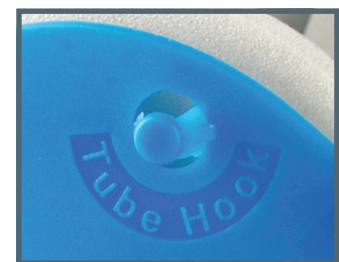

Befestigungsvorrichtung

**Ambu A/S**  
 Baltorpbakken 13  
 DK-2750 Ballerup  
 Denmark  
 Tel. +45 72 25 20 00  
 Fax +45 72 25 20 50  
 www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
 In der Hub 5  
 D-61231 Bad Nauheim  
 Tel. 06032 9250-0  
 Fax 06032 9250-200  
 www.ambu.de