

DATENBLATT

Steril direkt aus der Verpackung: das Ambu aScope Duodeno ist ein Einweg Duodenoskop mit retrograder Blickrichtung, ablenkbarer Spitze und einem Albarran-Hebel zur Steuerung der Position von kompatibelem endoskopischen Zubehör.

Ambu bietet Ihnen mit dem neuen Ambu aScope Duodeno ein Endoskop mit gleichbleibender Leistung, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination des Patienten vermieden wird. Darüber hinaus besteht keine Notwendigkeit einer kostspieligen Aufbereitung oder Reparatur.



Darstellung des Albarran-Hebels mit der Verwendung eines Sphinkterotoms



Die Albarran-Hebel-Steuerung bewegt den Albarran-Hebel auf- und abwärts..

Ambu® aScope™ Duodeno Steril. Einweg. Problem gelöst.



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Steril

Eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination

Bietet Kostentransparenz

Eliminiert die, mit der Aufbereitung verbundenen Risiken und Kosten

Das vertraute Design gewährleistet einen nahtlosen Übergang von herkömmlichen Duodenoskopen zum Ambu aScope Duodeno

Ambu

SPEZIFIKATIONEN

Optisches System

Blickrichtung	Retrograde Blickrichtung 6°
Blickfeld	130°

Einführbereich

Außendurchmesser	φ 13,7 mm
Durchmesser Arbeitskanal	φ 11,3 mm
Arbeitslänge	1240 mm

Instrumentenkanal

Innerer Durchmesser	φ 4,2 mm (12,6 FR)
---------------------	--------------------

Schwenkbarer Bereich

Abwinkelbereich	Nach oben 120° / nach unten 90° Links 90° / Rechts 110°
-----------------	---

Beleuchtung

Lichtquelle	LEDs
-------------	------

Abmessungen


Gewicht	700 g
---------	-------

BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackungs- einheit
485001000	Ambu aBox Duodeno	1 Stk.
482001000/4	Ambu aScope Duodeno	1 Karton à 1 Stk.**
482001000	Ambu aScope Duodeno	1 Karton à 6 Stk

*Einige Konfigurationen sind möglicherweise nicht weltweit verfügbar

**Die Umverpackung enthält eine Einzelverpackung mit einem Endoskop und die Bedienungsanleitung.

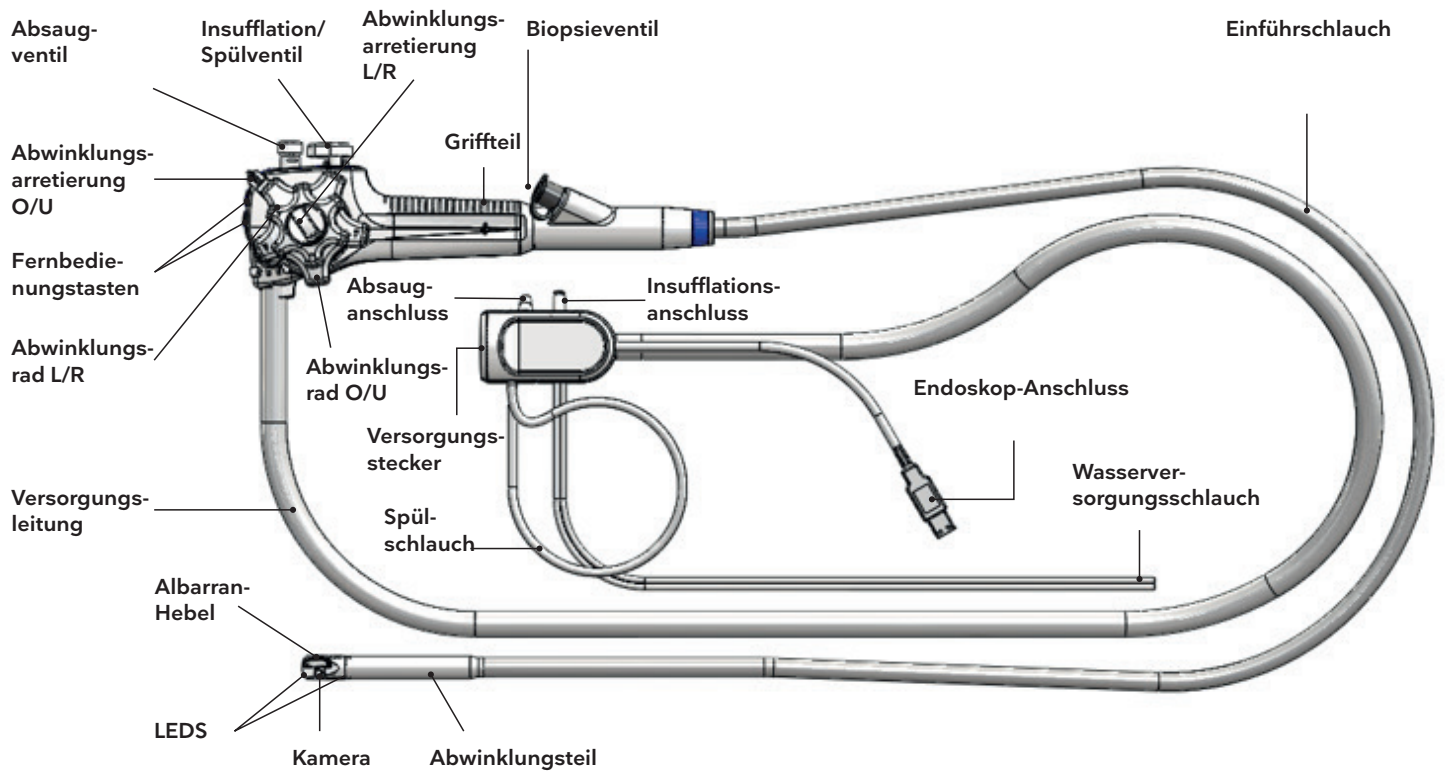

Ambu

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0
Fax +49 (0) 60 32/92 50-200
ambu.de

■ Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

CE
2797

US: Rx Only