

Ambu® Endoskopie-Katalog

ENDOSKOPIE- LÖSUNGEN

Ambu





EIN ZUVERLÄSSIGER PARTNER

PIONIERLÖSUNGEN IN DER EINWEG-ENDOSKOPIE

Ambu brachte 2009 das weltweit erste flexible Einweg-Bronchoskop auf den Markt. Heute werden unsere Einweg-Endoskope in Tausenden von Krankenhäusern weltweit und in verschiedenen klinischen Bereichen eingesetzt. Damit ist Ambu globaler Marktführer für Einweg-Endoskopie-Lösungen.

Mit uns, einem erfahrenen und zuverlässigen Lieferanten können Sie Ihre Einweg-Endoskopie-Lösungen über alle Krankenhausabteilungen und klinischen Bereiche hinweg standardisieren.

WARUM EINE PARTNERSCHAFT MIT DEM MARKTFÜHRER FÜR EINWEG-ENDOSKOPE?

1

Ihre Bedürfnisse prägen unsere Lösungen

Wir bei Ambu glauben, dass die besten Innovationen entstehen, wenn wir auf unsere Kunden hören.

Wir entwickeln Lösungen, die auf Ihre aktuellen Anforderungen ausgerichtet sind und helfen, unvorhergesehene Herausforderungen zu vermeiden. In unseren globalen Innovationszentren fließen die Erfahrungen führender Endoskopie-Experten in jede Produktentwicklung ein – mit dem Ziel, Sie heute und in Zukunft bei einem effizienteren und effektiveren Arbeiten zu unterstützen.

2

Sie erhalten die neuesten Innovationen schneller

Auf Basis Ihrer klinischen Erfahrungen möchten wir unsere Lösungen kontinuierlich verbessern und neue Produkte entwickeln. Unser modularer Ansatz ermöglicht es uns, die Entwicklung zu rationalisieren und mehrere Innovationen gleichzeitig durchzuführen. So können wir schneller auf Ihre Bedürfnisse reagieren und Ihnen innovative Lösungen bieten, die Sie an der Spitze der medizinischen Versorgung halten.

3

Auf uns können Sie sich verlassen

Wir kontrollieren unsere gesamte Wertschöpfungskette – von der Forschung und Entwicklung in Dänemark und Deutschland über die Produktion in unseren eigenen Werken in Malaysia, Indonesien und Mexiko bis hin zu unseren globalen Vertriebskanälen.

In Mexiko betreiben wir zudem die weltweit größte Produktionsstätte für Einweg-Endoskope. So gewährleisten wir eine zuverlässige Versorgung mit hochwertigen Produkten, die Ihren Klinikbetrieb reibungslos und termingerecht unterstützen.

INHALTS- VERZEICHNIS



Wählen Sie ein Thema aus, um eine Seite anzuzeigen

00

Ein zuverlässiger Partner
Ein neues hochwertiges steriles
Endoskop für jeden Patienten
Endoskopie-Portfolio
auf einen Blick

01

RESPIRATORY
Ambu® aScope™ 5 Broncho
Ambu® aScope™ 4 Broncho
Ambu® SureSight™ Mobile
Ambu® SureSight™ Connect
Ambu® aScope™ 5 Broncho Sampler Set
Ambu® aScope™ 4 Broncho Sampler Set
Ambu® VivaSight™
Endobronchialblocker-Tubus
Ambu® VivaSight™ 2 DLT
Ambu® VivaSight™ 2 SLT

02

Hals-Nasen-Ohren
Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo

03

Urologie
Ambu® aScope™ 4 Cysto
Ambu® aScope™ 5 Cysto HD
Ambu® aScope™ 5 Uretero

04

Gastroenterologie
Ambu® aScope™ Gastro
Ambu® aScope™ Gastro Large
Ambu® aScope™ Duodeno 2

05

**Visualisierungs-Systeme
(Visualisierungs- und
Prozessoreinheiten)**
Ambu® aView™ 2 Advance
Ambu® aBox™ 2

06

Mobile Arbeitsstationen
Ambu® aCart™ Compact
Ambu® aCart™ Compact (E-Box)
Ambu® aCart™ Compact (Transformator)
Ambu® aCart™ Compact (Konfigurationen)
Ambu® aCart™ Compact Plus

07


Nachhaltigkeit

08

Bestellnummern



EIN NEUES HOCHWERTIGES STERILES EINWEG-ENDOSKOP FÜR JEDEN PATIENTEN

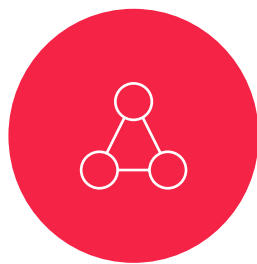

OPTIMIERT DEN ARBEITSABLAUF

Sofort einsatzbereit

Kein Warten mehr auf ein verfügbares Endoskop und keine Aufbereitung, wodurch Personalressourcen frei werden.

Leicht und kompakt

Unsere Endoskope lassen sich leicht mitnehmen und mit unseren Visualisierungs-Systemen in verschiedenen Krankenhausbereichen nutzen.

Hilft Ihnen, Ihren Zeitplan effizient zu gestalten

Senkt das Risiko, dass Verfahren abgesagt oder verschoben werden müssen, was dazu beitragen kann, lange Wartelisten zu reduzieren.



BIETET GLEICHBLEIBEND HOHE QUALITÄT UND LEISTUNG

Immer ein brandneues Endoskop


Keine Verschlechterung der Bildqualität oder Biegeleistung sowie keine Sorge um die Beschädigung eines teuren Endoskops

Nutzen Sie die neueste Technologie

Im Gegensatz zu Mehrweg-Endoskopen müssen Sie bei Einweg-Endoskopen nicht sechs oder sieben Jahre auf die Markteinführung eines neuen Produkts warten. Unser modularer Ansatz, die enge Zusammenarbeit mit klinischen Spezialisten wie Ihnen und die Konzentration auf Forschung und Entwicklung (F&E) ermöglichen einen schnellen Innovationszyklus.

Verlassen Sie sich auf die führenden Anbieter von Einweg-Endoskopen

Ambu verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Einweg-Endoskopie und bietet Ihnen eine zuverlässige, sterile und kostengünstige Lösung.

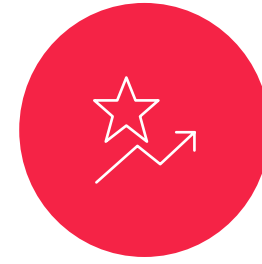

BIETET KOSTENVORTEILE

Einweg-Endoskope eliminieren Kosten im Zusammenhang mit:



Aufbereitung

Verbrauchsmaterialien, Wartung, Betriebsmittel usw.



Infektionen

Behandlungsbedingte Kosten



Investitionskosten

Teure Investitionen



Wartung und Reparatur

Wiederkehrende Kosten

Kennen Sie die tatsächlichen Kosten für die Verwendung eines Mehrweg-Endoskops?

Wenn Sie die wiederkehrenden Kosten für Aufbereitung, Wartung und Reparaturen sowie mögliche Verbesserungen der Arbeitsabläufe berücksichtigen, können Ambu Einweg-Endoskope Ihrem Krankenhaus insgesamt sogar Geld sparen.



VERBESSERT DIE PATIENTENSICHERHEIT

Einweg-Produkte eliminieren das Risiko einer Kreuzkontamination

Mehrweg-Endoskope sind nachweislich mit Kontaminationsrisiken verbunden.^{1,2}

Ambu Einweg-Endoskope beseitigen das Risiko einer Kreuzkontamination Ihrer Patienten, da Sie für jeden Patienten ein brandneues, steriles Endoskop erhalten.

Mit Ambu Einweg-Endoskopen können Sie:

- Ihren Patienten versichern, dass Sie den Eingriff mit einem sterilen Einweg-Endoskop durchführen, das direkt aus einer versiegelten Verpackung entnommen wird.
- Das Risiko einer Kreuzkontamination eliminieren.
- Das Risiko minimieren, dass Patienten durch wiederholte Exposition gegenüber Desinfektionsmittelrückständen nach der Aufbereitung Allergien entwickeln.



AMBU ENDOSKOPIE-PORTFOLIO AUF EINEN BLICK

	Bereich	Artikel-Nr.	Bild	Blickfeld	Durchmesser Einführungsschlauch	Durchmesser distales Ende	Innendurchmesser Arbeitskanal	Biegewinkel	Anschluss	Kompatibel mit Ambu® aView™ 2 Advance 	Kompatibel mit Ambu® aView™ 2 Advance 	Kompatibel mit Ambu® aBox™ 2
RESPIRATORY	aScope™ 5 Broncho 2.7/1.2	624001000		120°	2,7 mm	3,0 mm	1,2 mm	210° nach oben, 210° nach unten		Ja	-	Ja
	aScope™ 5 Broncho 4.2/2.2	620001000		120°	4,2 mm	4,4 mm	2,2 mm	210° nach oben, 210° nach unten		Ja	-	Ja
	aScope™ 5 Broncho HD 5.0/2.2	621001000		120°	5,0 mm	5,4 mm	2,2 mm	195° nach oben, 195° nach unten		Ja	Ja	Ja
	aScope™ 5 Broncho HD 5.6/2.8	622001000		120°	5,6 mm	6,0 mm	2,8 mm	195° nach oben, 195° nach unten		Ja	Ja	Ja
	aScope™ 5 Broncho 4.2/2.2 Sampler Set	620002000		120°	4,2 mm	4,4 mm	2,2 mm	210° nach oben, 210° nach unten		Ja	-	Ja
	aScope™ 5 Broncho HD 5.0/2.2 Sampler Set	621002000		120°	5,0 mm	5,4 mm	2,2 mm	195° nach oben, 195° nach unten		Ja	Ja	Ja
	aScope™ 5 Broncho HD 5.6/2.8 Sampler Set	622002000		120°	5,6 mm	6,0 mm	2,8 mm	195° nach oben, 195° nach unten		Ja	Ja	Ja
	aScope™ 4 Broncho Slim	476001000		85°	3,8 mm	4,2 mm	1,2 mm	180° nach oben, 180° nach unten		Ja	Ja	-
	aScope™ 4 Broncho Regular	477001000		85°	5,0 mm	5,4 mm	2,2 mm	180° nach oben, 180° nach unten		Ja	Ja	-
	aScope™ 4 Broncho Large	478001000		85°	5,8 mm	6,3 mm	2,8 mm	180° nach oben, 160° nach unten		Ja	Ja	-
	aScope™ 4 Broncho Regular Sampler Set	477501000		85°	5,0 mm	5,4 mm	2,2 mm	180° nach oben, 180° nach unten		Ja	Ja	-
	aScope™ 4 Broncho Large Sampler Set	478501000		85°	5,8 mm	6,3 mm	2,8 mm	180° nach oben, 160° nach unten		Ja	Ja	-
	SureSight™ Connect	390510000		-	-	-	-	-		Ja	Ja	Ja
	SureSight™ Mobile	390410000		-	-	-	-	-	-	Nein	Nein	-

Nicht alle Produkte und Zubehörteile sind in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ambu-Medizinprodukteberater vor Ort, um mehr zu erfahren.



AMBU ENDOSKOPIE-PORTFOLIO AUF EINEN BLICK


	Bereich	Artikel-Nr.	Bild	Blickfeld	Durchmesser Einführungsschlauch	Durchmesser distales Ende	Innendurchmesser Arbeitskanal	Biegewinkel	Anschluss	Kompatibel mit Ambu® aView™ 2 Advance ●●●	Kompatibel mit Ambu® aView™ 2 Advance ●●●	Kompatibel mit Ambu® aBox™ 2 ●●
RESPIRATORY	SureSight Blade Miller Size 0 -EU/ROW	390100000		68° (±15 %)	-	-	-	-	-	-	-	-
	SureSight Blade Miller Size 1 -EU/ROW	390110000		68° (±15 %)	-	-	-	-	-	-	-	-
	SureSight Blade Hyperangulated Size 1 -EU/ROW	390210000		68° (±15 %)	-	-	-	-	-	-	-	-
	SureSight Blade Hyperangulated Size 2 -EU/ROW	390220000		68° (±15 %)	-	-	-	-	-	-	-	-
	SureSight Blade Hyperangulated Size 3 -EU/ROW	390230000		68° (±15 %)	-	-	-	-	-	-	-	-
	SureSight Blade Hyperangulated Size 4 -EU/ROW	390240000		68° (±15 %)	-	-	-	-	-	-	-	-
	SureSight Blade MAC Size 3 -EU/ROW	390330000		68° (±15 %)	-	-	-	-	-	-	-	-
	SureSight Blade MAC Size 4 -EU/ROW	390340000		68° (±15 %)	-	-	-	-	-	-	-	-
	SureSight Blade Hyperangulated Size 2 Channeled -EU/ROW	390520000		68° (±15 %)	-	-	-	-	-	-	-	-
	SureSight Blade Hyperangulated Size 3 Channeled -EU/ROW	390530000		68° (±15 %)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ambu SureSight Stylet Small	321900010		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ambu SureSight Stylet Medium	321900020		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ambu SureSight Stylet Large	321900030		-	-	-	-	-	-	-	-	-
HNO	aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim	510001000		85°	3,0 mm	3,5 mm	-	130° nach oben, 130° nach unten	●	Ja	Ja	-
	aScope™ 4 RhinoLaryngo Intervention	512001000		85°	5,0 mm	5,5 mm	2,2 mm	130° nach oben, 130° nach unten		Ja	Ja	-

Nicht alle Produkte und Zubehörteile sind in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ambu-Medizinprodukteberater vor Ort, um mehr zu erfahren.



	Bereich	Artikel-Nr.	Bild	Blickfeld	Durchmesser Einführungsschlauch	Durchmesser distales Ende	Innendurchmesser Arbeitskanal	Biegewinkel	Anschluss	Kompatibel mit Ambu® aView™ 2 Advance ●●●	Kompatibel mit Ambu® aView™ 2 Advance ●●●	Kompatibel mit Ambu® aBox™ 2 ●●
Urologie	aScope™ 4 Cysto - Reverse Deflection	600001000		120°	16,2 Fr	16,2 Fr	6,6 Fr	210° nach oben, 120° nach unten	●	Ja	Ja	-
	aScope™ 4 Cysto - Standard Deflection	601001000		120°	16,2 Fr	16,2 Fr	6,6 Fr	210° nach oben, 120° nach unten	●	Ja	Ja	-
	aScope™ 5 Cysto HD - Reverse Deflection	602001000		120°	16,2 Fr	16,8 Fr	6,6 Fr	210° nach oben, 120° nach unten	●	Ja	Ja	Ja
	aScope™ 5 Cysto HD - Standard Deflection	603001000		120°	16,2 Fr	16,8 Fr	6,6 Fr	210° nach oben, 120° nach unten	●	Ja	Ja	Ja
	aScope™ 5 Uretero - Reverse Deflection	605001000		90°	8,1 Fr	7,9 Fr	3,6 Fr	270° nach oben, 270° nach unten	●	Ja	-	Ja
	aScope™ 5 Uretero - Standard Deflection	604001000		90°	8,1 Fr	7,9 Fr	3,6 Fr	270° nach oben, 270° nach unten	●	Ja	-	Ja
Gastroenterologie	aScope™ Gastro	483001000		140°	9,9 mm	9,9 mm	2,8 mm	210°/ 90°/100°/100°	-	-	-	Ja
	aScope™ Gastro Large	582001000		140°	11,5 mm	11,5 mm	4,2 mm	210°/ 120°/100°/100°	-	-	-	Ja
	aScope™ Duodeno 2	486004000		140°	11,5 mm	13,7 mm	4,2 mm	120° nach oben, 90° nach unten, 90° links, 110° rechts	-	-	-	Ja
VivaSight	VivaSight™ 2 DLT Kit 35 Fr - LINKS	412351000		-	10,5 mm	-	4,4 mm	-	●	Ja	Ja	-
	VivaSight™ 2 DLT Kit 37 Fr - LINKS	412371000		-	11 mm	-	4,6 mm	-	●	Ja	Ja	-
	VivaSight™ 2 DLT Kit 39 Fr - LINKS	412391000		-	11,5 mm	-	4,8 mm	-	●	Ja	Ja	-
	VivaSight™ 2 DLT Kit 41 Fr - LINKS	412411000		-	12,0 mm	-	5,0 mm	-	●	Ja	Ja	-
	VivaSight™ 2 SLT - 7,0 mm	412701000		-	10 mm	-	4,6 mm	-	●	Ja	Ja	-
	VivaSight™ 2 SLT - 7,5 mm	412751000		-	10,5 mm	-	4,8 mm	-	●	Ja	Ja	-
	VivaSight™ 2 SLT - 8,0 mm	412801000		-	11 mm	-	5,2 mm	-	●	Ja	Ja	-
	VivaSight™ Endobronchialblocker-Tubus	412900000		-	9 Fr	-	-	-	-	-	-	-

Nicht alle Produkte und Zubehörteile sind in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ambu-Medizinprodukteberater vor Ort, um mehr zu erfahren.

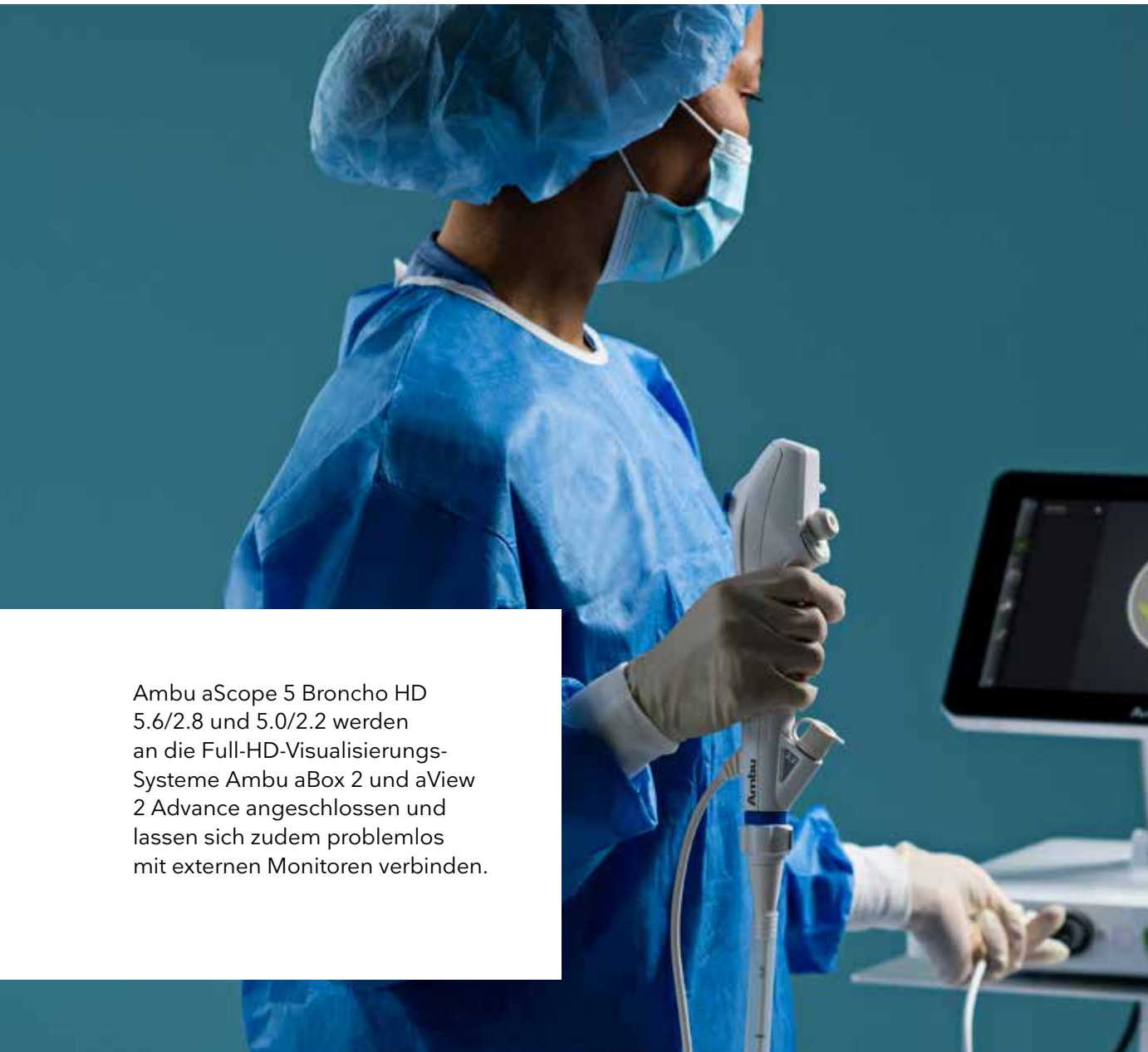

Ambu aScope 5 Broncho HD 5.6/2.8 und 5.0/2.2 werden an die Full-HD-Visualisierungssysteme Ambu aBox 2 und aView 2 Advance angeschlossen und lassen sich zudem problemlos mit externen Monitoren verbinden.



Ambu® aScope™ 5 Broncho

SETZT NEUE MASSSTÄBE
IN DER EINWEG-
BRONCHOSKOPIE

Unsere leistungsstarke flexible Einweg-Bronchoskopie-Lösung erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Verfahrensabläufe in fortschrittlichen diagnostischen und therapeutischen Verfahren.

Das Ambu aScope 5 Broncho bietet hervorragende Manövrierfähigkeit, Bildgebung auf höchstem Niveau und Flexibilität, die Sie für den komplizierten und anspruchsvollen Arbeitsablauf in der Pulmologie benötigen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Aufbereitung und Endoskop-Reparaturen entfallen vollständig
- Machen Sie mehr Verfahren möglich – bei gleichzeitig geringem Investitionsaufwand
- Entwickelt für die reibungslose Einführung und Positionierung von Endotherapie-Instrumenten
- Wählen Sie das richtige Endotherapie-Instrument, ohne befürchten zu müssen, ein teures Endoskop zu beschädigen
- Das System liefert eine hohe Bildqualität für eine klare Visualisierung des Bronchialbaums
- Einfache Integration der Ambu Visualisierungs- und Prozessoreinheiten in die verwendeten Dokumentationssysteme
- Bieten Sie Ihrem Patienten ein steriles Endoskop und eliminieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination
- Die weltweit ersten Bronchoskope mit Bioplastik im Griff



IDEAL FÜR KLEINERE ANATOMIEN IM OPERATIONSSAAL UND AUF DER INTENSIVSTATION	IDEAL FÜR PERIPHERE BRONCHOSKOPIEN	IDEAL FÜR DIAGNOSTISCHE UND THERAPEUTISCHE VERFAHREN
Ambu® aScope™ 5 Broncho 2.7/1.2 Das ultradünne aScope 5 Broncho 2.7/1.2 eignet sich für ET-Tuben ab einer Größe von 3,5 mm und bietet gleichzeitig einen 1,2-mm-Arbeitskanal.	Ambu® aScope™ 5 Broncho 4.2/2.2 Bietet einen Arbeitskanal normaler Größe in einem schmalen Bronchoskop.	Ambu® aScope™ 5 Broncho HD 5.6/2.8 and 5.0/2.2 Hervorragende Manövrierfähigkeit – auch bei der Anwendung von Endotherapie-Instrumenten, einschließlich Hochfrequenzgeräten.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Ambu aScope 5 Broncho HD 5.6/2.8	Ambu aScope 5 Broncho HD 5.0/2.2	Ambu aScope 5 Broncho 4.2/2.2	Ambu aScope 5 Broncho 2.7/1.2
Artikel-Nr.	622001000	621001000	620001000	624001000
Stückzahl pro Karton	5	5	5	5
Arbeitskanal	2,8 mm	2,2 mm	2,2 mm	1,2 mm
Sichtfeld	120°	120°	120°	120°
Biegewinkel*	195° nach oben, 195° nach unten	195° nach oben, 195° nach unten	210° nach oben, 210° nach unten	210° nach oben, 210° nach unten
Tubus-Größen	ET-Tuben ID ≥7,0 mm	ET-Tuben ID ≥6,0 mm	ET-Tuben ID ≥ 5,0 mm Min. DLT ≥ 37 FR	ET-Tuben ID ≥ 3,5 mm Min. DLT ≥ 32 FR
Kompatibel mit aView 2 Advance 	Ja	Ja	Ja	Ja
Kompatibel mit aView 2 Advance 	Ja	Ja	-	-
Kompatibel mit aBox 2	Ja	Ja	Ja	Ja

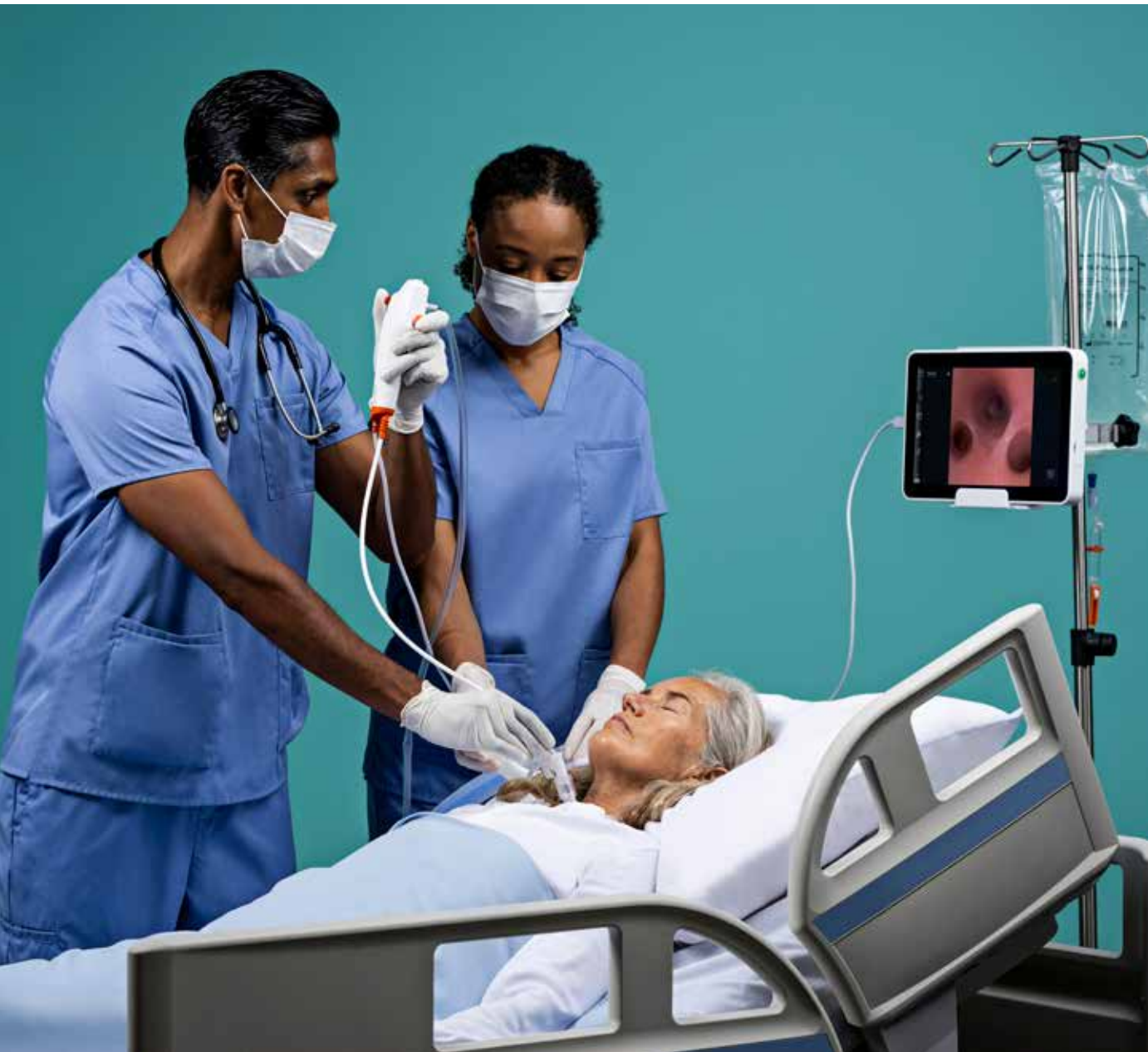

Der ergonomische und leichte Griff bietet optimalen Halt und Griffkomfort.

Ambu® aScope™ 4 Broncho

TRAGBAR, LEICHT UND EINFACH EINZURICHTEN

Unsere unverzichtbaren flexiblen Einweg-Bronchoskope. Sie können für eine Vielzahl von Verfahren im gesamten Krankenhaus eingesetzt werden, angefangen von Intubationen und Thoraxanästhesie im OP bis hin zu routinemäßigen Bronchoskopen auf der Intensivstation.

Das aScope 4 Broncho bietet die wesentlichen Leistungsmerkmale einer sterilen, kostengünstigen und sofort einsatzbereiten Lösung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sofortige Verfügbarkeit
- Kein Kreuzkontaminationsrisiko
- Kostengünstig
- Leichte Einsetzbarkeit
- Klare, scharfe Bilder
- Leichte und einfache Navigation
- Die weltweit ersten Bronchoskope mit Bioplastik im Griff

Ambu® aScope™ 4 Broncho Produktfamilie



Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim

Für eine Vielzahl bronchoskopischer Verfahren – von der Intubation bis hin zur Platzierung und Kontrolle von Doppellumentuben und Bronchusblockern im Operationssaal.



Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular

Eine hervorragende Lösung für zahlreiche Anwendungen – von der Intubation und dem Training von Intubationsfertigkeiten bis hin zur Bronchoskopie am Krankenbett, einschließlich PDT-Verfahren.



Ambu® aScope™ 4 Broncho Large

Mit einem 2,8-mm-Arbeitskanal ideal für das Sekretmanagement.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Ambu aScope 4 Broncho Slim	Ambu aScope 4 Broncho Regular	Ambu aScope 4 Broncho Large
Artikel-Nr.	476001000	477001000	478001000
Stückzahl pro Karton	5	5	5
Arbeitskanal	1,2 mm	2,2 mm	2,8 mm
Sichtfeld	85°	85°	85°
Biegewinkel*	180° nach oben, 180° nach unten	180° nach oben, 180° nach unten	180° nach oben 160° nach unten
Tubus-Größen	ET-Tuben ID ≥ 5 mm DLT-Tuben ≥ 37 Fr	ET-Tuben ID ≥ 6 mm Min. DLT ≥ 41 Fr	ET-Tuben ID ≥ 7 mm
Kompatibel mit aView 2 Advance   	Ja	Ja	Ja
Kompatibel mit aView 2 Advance   	Ja	Ja	Ja
Kompatibel mit aBox 2	-	-	-



Ambu® aView™ 2 Advance
Ambu® aBox™ 2
(hier nicht abgebildet)

Plug-and-Play-System, das als Steuerzentrale für wichtige Ambu Atemwegs-Visualisierungsgeräte dient

Ambu® aCart™ Compact

Alles griff- und einsatzbereit.
Ein kompakter, mobile Endoskopie-Wagen für die SureSight Connect Video-Laryngoskop-Lösung und andere wichtige Geräte.

Ambu® SureSight™ Connect

Ein intuitives, ergonomisches und zuverlässiges Video-Laryngoskop

- Ein hörbares Klicken bestätigt, dass der Spatel richtig befestigt ist
- Ergonomisches Design für sicheren Griff und optimale Kontrolle
- Antibeschlag-Objektiv für ein klares und gleichmäßiges Bild
- Gut erreichbare Video-/Kamerataste

Umfassendes Spatel-Portfolio

VL-Spatel aus PC-Bioplastik* für alle Patienten, einschließlich Erwachsene und Kinder, für routinemäßige und schwierige Intubationen bei akuten und geplanten Eingriffen.

- Miller 0
- Miller 1
- Hyper 1
- Hyper 2
- Hyper 2C
- Hyper 3
- Hyper 3C
- Hyper 4
- Mac 3
- Mac 4

* Unser PC-Bioplastik-Material (unter Verwendung der Biatribution) besteht zu 55 % aus biobasierten Rohstoffen der zweiten Generation und zu 45 % aus traditionellen fossilen Rohstoffen (zertifiziert nach dem Massenbilanzverfahren).

Ambu® SureSight™ Connect

RICHTEN SIE IHRE VOLLE AUFMERKSAMKEIT AUF IHREN PATIENTEN

Das Ambu® SureSight™ Connect Video-Laryngoskop ist Teil unserer bewährten Visualisierungs-Plattform. Ein einheitliches, intuitives und vertrautes System hilft Ihnen dabei, sich ganz auf den Patienten zu konzentrieren, während Sie zwischen den Geräten wechseln und den Algorithmus des Atemwegsmanagements durchlaufen.

Ein System, mehrere Visualisierungsgeräte

Mit der Dual View-Funktion in den Visualisierungs-Systemen können Sie bei schwierigen Atemwegen zwei unserer Atemwegs-Visualisierungsgeräte gleichzeitig nutzen, ohne ein zweites Visualisierungs-System zu benötigen.

Optimiert die Arbeit mit Bilddaten von Patienten

Die Visualisierungs-Systeme unterstützen eine Anbindung an elektronische Patientenakten (ePA), um die wichtige Aufgabe des Teilens und Übertragens von Patienten-Daten zu vereinfachen.



Das SureSight Mobile Kit

Zur Aufbewahrung der Lösung und ihres Zubehörs enthält das Kit Folgendes:

- eine kompakte Tragetasche zur einfachen Aufbewahrung bei begrenztem Platzangebot
- das SureSight Mobile Video-Laryngoskop
- Batterie mit bis zu 100 Minuten Laufzeit
- Batterieladegerät und Ersatzbatterie – halten Sie die zusätzliche Batterie aufgeladen, damit sie einsatzbereit ist
- Datenkabel zur einfachen Übertragung von Videos und Bildern auf ein externes Gerät



Optimierte Bildgebung

Ein um 170 Grad neigbarer Touchscreen und ein Umgebungslichtsensor ermöglichen eine optimale Positionierung und Ansicht für verschiedene Umgebungen



Verlässlichkeit

Wiederaufladbare/austauschbare Batterien mit einer Kapazität von bis zu 100 Minuten



Einfache Dokumentation

Einfache Bild-/Videoaufnahme, automatische Aufzeichnung und Wiedergabe



Umfassendes Spatel-Portfolio

VL-Spatel werden aus PC-Bioplastik* hergestellt und umfassen Optionen für erwachsene und pädiatrische Patienten. Sie sind sowohl mit den SureSight Connect- als auch den SureSight Mobile-Lösungen kompatibel, eignen sich für Routine- und schwierige Intubationen und können in geplanten wie auch in Notfallsituationen eingesetzt werden.

- | | | |
|------------|------------|------------|
| • Miller 0 | • Mac 4 | • Hyper 3 |
| • Miller 1 | • Hyper 1 | • Hyper 3C |
| • Mac 3 | • Hyper 2 | • Hyper 4 |
| | • Hyper 2C | |

Die Ambu® SureSight™ Mobile Lösung im Handformat

EIN MOBILES VIDEO-LARYNGOSKOP, AUF DAS SICH FACHPERSONAL VERLASSEN KANN

Die Flexibilität, Zuverlässigkeit und vertraute Handhabung des SureSight Mobile Video-Laryngoskops machen es zu einer verlässlichen Lösung für klinisches Fachpersonal – sowohl als Erstwahlgerät als auch als Backup – in einer Vielzahl klinischer Umgebungen, sowohl im Krankenhaus als auch in der Präklinik.

- Vielseitig: Für klinisches Fachpersonal in Notfällen oder ungeplanten Szenarien im Krankenhaus; für Rettungsdienst-Teams in verschiedenen präklinischen Umgebungen
- Zuverlässig: Den Atemweg zuverlässig herstellen und aufrechterhalten
- Anwenderfreundlich: Ergonomisches Design und einfache Touchscreen-Bedienung



Ambu® aScope™ 5 Broncho Sampler Set

GERINGES RISIKO VON PROBENVERLUSTEN, HOHER GRAD AN KONTROLLE

Die Ambu Einweg-Lösung zur Probenentnahme bietet im Vergleich zu herkömmlichen Methoden eine bessere Möglichkeit, um BAL- und BW-Verfahren in der Endoskopie-Abteilung durchzuführen.

Die innovative geschlossene Lösung wird mit einem 60-ml-Probenbehälter im aScope 5 Broncho Sampler Set angeboten. Dies unterstützt die bei Verfahren benötigte Probengrößen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Eine spezielle Lösung für die Probenentnahme mittels bronchoalveolärer Lavage (BAL)
- Einfache Bedienung
- Geschlossenes System zur Reduzierung des Risikos von Kontamination und Probenverlust



Einfaches Anbringen und Abnehmen des Samplers am/vom Bronchoskop



Umschalten zwischen Absaugen und Probenentnahme per Knopfdruck



Nach Abschluss wird die entnommene Probe versiegelt, geschützt und ist einsatzbereit

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Ambu aScope 5 Broncho 4.2/2.2 Sampler Set	Ambu aScope 5 Broncho 5.0/2.2 Sampler Set	Ambu aScope 5 Broncho 5.6/2.8 Sampler Set	Ambu aScope BronchoSampler 60 ml, Ersatz-Probenbehälter
Artikel-Nr.	620002000	621002000	622002000	480500000
Stückzahl pro Karton	5	5	5	10
Probenbehältervolumen	60 ml	60 ml	60 ml	60 ml
Arbeitskanal	2,2 mm	2,2 mm	2,8 mm	-

Ambu® aScope™ 4 Broncho Sampler Set

ERHÖHT DIE PATIENTENSICHERHEIT UND VEREINFACHT DEN ARBEITSABLAUF

Ein geschlossenes System, das die Probe von Anfang bis Ende schützt und Ihren Arbeitsablauf im OP und auf der Intensivstation vereinfacht. Das Ambu aScope 4 Broncho Sampler Set zur einmaligen Verwendung ist eine integrierte Lösung, die die Sicherheit erhöht und den Ablauf der Probenentnahme vereinfacht.

Die 30 ml Probenentnahme-Lösung wird zusammen mit dem Ambu aScope 4 Broncho Regular (5.0/2.2) bzw. Ambu aScope 4 Broncho Large (5.8/2.8) geliefert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Komplett-Lösung zur Probenentnahme
- Vereinfacht Ihren Arbeitsablauf
- Geschlossenes System zur Reduzierung des Risikos von Kontamination und Probenverlust



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Ambu aScope 4 Broncho Regular Sampler Set	Ambu aScope 4 Broncho Large Sampler Set	Ambu aScope Broncho Sampler 60 ml, Ersatz-Probenbehälter
Artikel-Nr.	477501000	478501000	480500000
Stückzahl pro Karton	5	5	10
Probenbehältervolumen	30 ml	30 ml	60 ml
Arbeitskanal	2,2 mm	2,8 mm	-



Ambu® VivaSight™ Endobronchialblocker-Tubus



Der VivaSight Endobronchialblocker-Tubus ist ein Einweg-Endobronchialblocker für die einseitige Lungenbeatmung.

Er beinhaltet einen lenkbaren Ballonkatheter, der visuell zu einem ausgewählten Bronchialsegment geführt wird, um die Ballonblockierung des distalen Atemwegs zu verändern.

Um die Navigation zu den Bronchien zu erleichtern, kann die abgewinkelte distale Spitze des VivaSight Endobronchialblocker-Tubus justiert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit dem Ambu VivaSight 2 SLT zur Visualisierung des SLT und des Endobronchialblockers während der ELV

Ambu® VivaSight™ 2 DLT




VivaSight 2 DLT ist ein steriler, doppellumiger Einweg-Endobronchialtubus der zur Isolierung der linken oder rechten Lunge eines Patienten für die kontinuierliche Visualisierung während der Ein-Lungen-Beatmung sowie zur Überprüfung der Tubusplatzierung und zur Neupositionierung bestimmt ist.

VivaSight 2 DLT ähnelt im Aufbau herkömmlichen Doppellumen-Tuben, verfügt jedoch über eine integrierte Videokamera, die an ein Ambu-Visualisierungseinheit angeschlossen wird, wodurch die Positionierung des Tubus in Echtzeit überwacht werden kann.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Erhöht die Patientensicherheit
- Verbessert den Verfahrensablauf
- Kostengünstige Alternative zur einseitigen Lungenbeatmung (ELV), die den Bedarf an einem Bronchoskop reduzieren kann
- Kompatibel mit dem tragbaren Visualisierungs-System Ambu® aView™ 2 Advance

Ambu® VivaSight™ 2 SLT

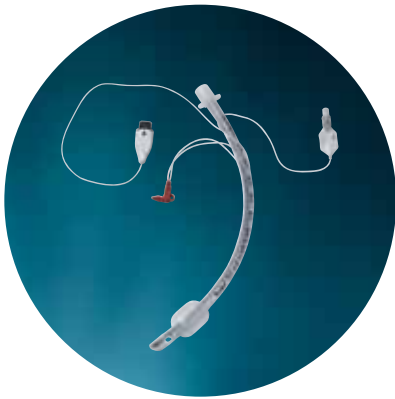

Der Ambu VivaSight 2 SLT ist ein steriler Einweg-Endotrachealtubus mit integrierter Kamera. Er ist für orale Intubationsverfahren, die allgemeine Untersuchung der Atemwege zur Visualisierung während Intubationsverfahren und für temporäre künstliche Atemwege bei Erwachsenen vorgesehen, die eine mechanische Beatmung benötigen.

VivaSight 2 SLT ist ähnlich aufgebaut wie herkömmliche Einzellumentuben, verfügt jedoch über eine eingebaute Videokamera, die an eine Ambu Visualisierungseinheit angeschlossen ist, sodass die Tubusplatzierung in Echtzeit überwacht werden kann.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Einfachere endotracheale Intubation
- Kontinuierliche Visualisierung der Tubus- und Endobronchialblockerposition
- Kann den Einsatz eines Bronchoskops reduzieren
- Kompatibel mit dem tragbaren Visualisierungs-System Ambu® aView™ 2 Advance



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	VivaSight 2 DLT Kit 35 Fr - LINKS	VivaSight 2 DLT Kit 37 Fr - LINKS	VivaSight 2 DLT Kit 39 Fr - LINKS	VivaSight 2 DLT Kit 41 Fr - LINKS	VivaSight 2 SLT 7,0 mm	VivaSight 2 SLT 7,5 mm	VivaSight 2 SLT 8,0 mm	VivaSight 2 SLT + EBB Kit 7,0 mm, 9 Fr	VivaSight 2 SLT + EBB Kit 7,5 mm, 9 Fr	VivaSight 2 SLT + EBB Kit 8,0 mm, 9 Fr	VivaSight Endobronchialblocker- Tubus
Artikel-Nr.	412351000	412371000	412391000	412411000	412701000	412751000	412801000	412709000	412759000	412809000	412900000
Stückzahl pro Karton	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Größe	35 Fr	37 Fr	39 Fr	41 Fr	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm	9 Fr
ID Effektiver Innendurch- messer (mm)	4,4	4,6	4,8	5,0	4,6	4,8	5,2	4,6	4,8	5,2	-
Außendurch- messer (mm)	10,5	11,0	11,5	12,0	10,0	10,5	11,0	10,0	10,5	11,0	-
Kompatibel mit aView 2 Advance 	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Kompatibel mit aView 2 Advance 	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-

Die VivaSight 2 Produktreihe ist nicht kompatibel mit der aBox 2

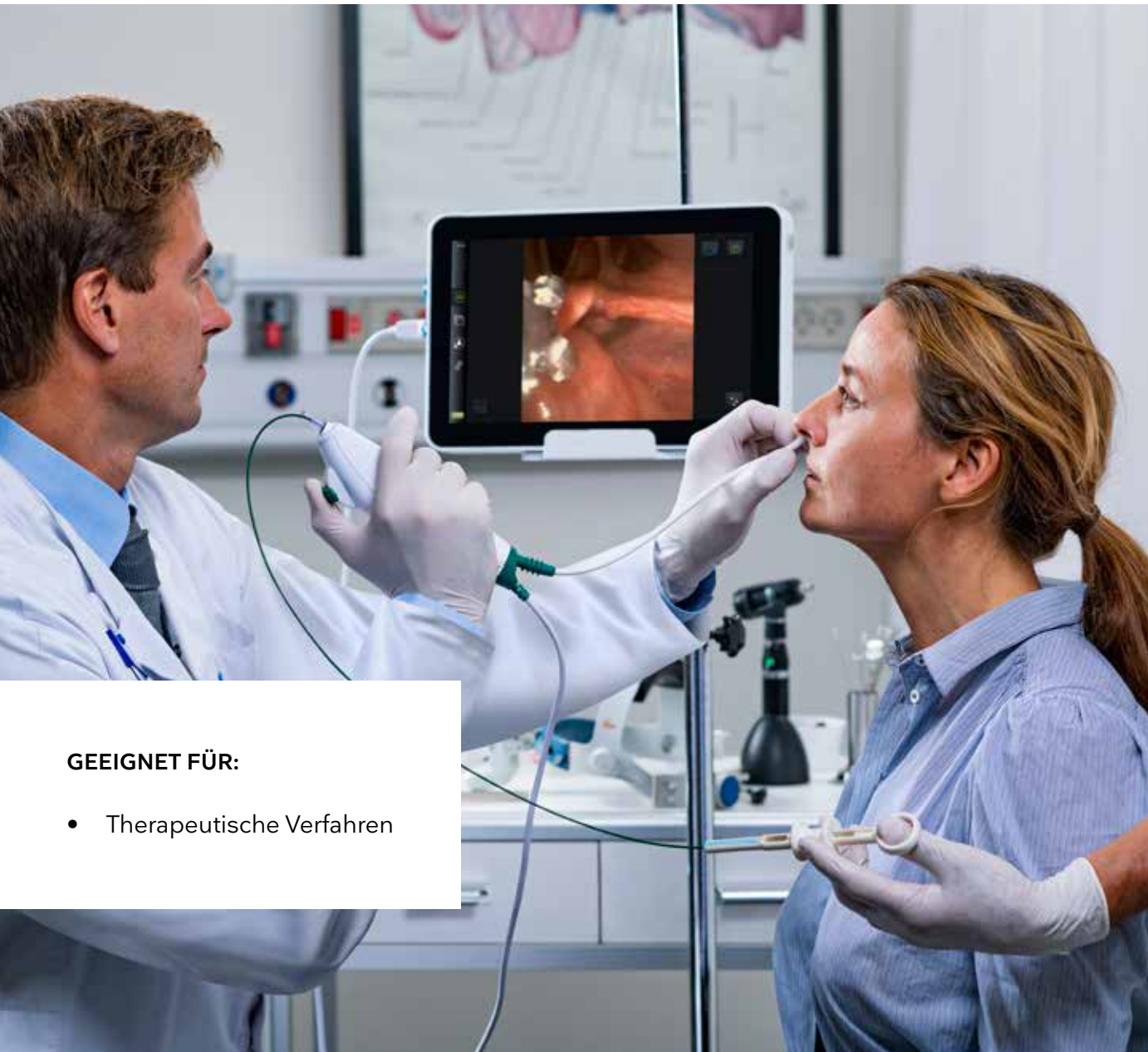

GEEIGNET FÜR:

- Therapeutische Verfahren



GEEIGNET FÜR:

- Nasale Endoskopie
- Flexible Laryngoskopie
- Schluckuntersuchungen

Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo

MEHR PRODUKTIVITÄT AN IHREM ARBEITSPLATZ

Das Ambu aScope RhinoLaryngo ist eine flexible, tragbare und hochwertige Lösung, die die Produktivität des Fachpersonals steigern kann. Das Endoskop ist immer verfügbar, leicht mitzunehmen und erfordert keine Aufbereitung oder Reparatur, was es zur perfekten Einweg-Zystoskop-Lösung macht.

Darüber hinaus bietet das Gerät eine hochwertige Bildgebung sowie integrierte Bild-, Video- und Audioaufzeichnung, sodass Sie Eingriffe sicher durchführen, diese mühelos dokumentieren und Ihren Arbeitsablauf optimieren können.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Vereinfachter Arbeitsablauf ohne komplizierte Aufbereitung und Reparaturen
- Hochwertige Bildgebung auf dem Full-HD-Monitor Ambu aView 2 Advance
- Kann zu jedem Einsatz mitgenommen werden
- Immer einsatzbereit, um Verzögerungen zu vermeiden
- Ein brandneues Endoskop mit der gleichen hohen Qualität bei jedem Eingriff
- Geringe Investitionskosten und uneingeschränkte Kostentransparenz
- Die weltweit ersten Bronchoskope mit Bioplastik im Griff



Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim

Das aScope 4 RhinoLaryngo Slim Einweg-Rhinolaryngoskop ist mit einem kleinen Außendurchmesser von 3,0 mm ausgestattet, um Unannehmlichkeiten für den Patienten während des Eingriffs zu minimieren.



Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo Intervention

Das aScope RhinoLaryngo Intervention Einweg-Rhinolaryngoskop ist immer einsatzbereit, bedarf nach der Verwendung keinerlei Aufbereitung und ist mit geringen Investitionskosten verbunden, wodurch es sich besonders für ambulante Biopsien eignet.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Ambu aScope 4 RhinoLaryngo Slim	Ambu aScope 4 RhinoLaryngo Intervention
Artikel-Nr.	510001000	512001000
Stückzahl pro Karton	5	5
Durchmesser Einführungsschauch	3,0 mm	5,0 mm
Arbeitskanal	-	2,0 mm
Sichtfeld	85°	85°
Biegewinkel	130° nach oben, 130° nach unten	130° nach oben, 130° nach unten
Kompatibel mit aView 2 Advance   	Ja	Ja
Kompatibel mit aView 2 Advance   	Ja	Ja
Kompatibel mit aBox 2	-	-



GEEIGNET FÜR:

- Flexible Zystoskopie
- Stationäre Zystoskopie zur Durchführung von Konsilen

Ambu® aScope™ 4 Cysto

EINWEG.
NEUE MÖGLICHKEITEN.

Das Ambu aScope 4 Cysto ist ein flexibles Einweg-Endoskop, das klinische Arbeitsabläufe vereinfacht, Ressourcen schont und jederzeit einsatzbereit ist. Als mobile Lösung ist es stets griffbereit, lässt sich schnell und unkompliziert einrichten und nahtlos in bestehende Systeme integrieren.

Das aScope 4 Cysto bietet eine gleichbleibend hohe Bild- und Biegequalität sowie die erforderliche Manövrierfähigkeit für eine sichere Durchführung von Zystoskopien. In Kombination mit der Visualisierungs- und Prozesseinheit aView™ 2 Advance ermöglicht es eine HD-Darstellung mit hoher Bildqualität.

Da es sich um ein Einweg-Zystoskop handelt, bleiben Leistung und Handhabung über den gesamten Einsatz hinweg konstant. Aufbereitung und kostenintensive Reparaturen entfallen – so werden Ressourcen freigesetzt und der Fokus kann auf die Versorgung weiterer Patienten gelegt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Bildgebung und Manövrierbarkeit
- Garantierte Sterilität ohne Risiko einer Kreuzkontamination
- Mobile, tragbare Lösung
- Sofort einsatzbereit
- Gleichbleibende Qualität
- Bietet eine optimale Nutzung der Ressourcen, da zeitintensive Aufbereitung und hohe Reparaturkosten entfallen
- Das weltweit erste Zystoskop mit Bioplastik im Griff



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Ambu aScope 4 Cysto	
Artikel-Nr.	600001000 – Umkehrdeflektion 601001000 – Standarddeflektion
Stückzahl pro Karton	5
Durchmesser Einführungsbereich	16,2 Fr
Arbeitskanal	6,6 Fr
Sichtfeld	120°
Biegewinkel*	210° nach oben, 120° nach unten
Kompatibel mit aView 2 Advance	Ja
Kompatibel mit aView 2 Advance	Ja
Kompatibel mit aBox 2	Nein

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

	4-Wege-Hahn. 50 psi (3,5 bar) Überwurfmutter. Große Bohrung	Hämostaseventil. AccessPLUS Große Bohrung
Artikel-Nr.	K12-11412	K12-11413
Stückzahl pro Karton	50 Stk.	25 Stk.
Bild		



Ambu® aScope™ 5 Cysto HD

EINWEG-EFFIZIENZ- BILDGEBUNG
AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Das aScope™ 5 Cysto HD ist eine sterile, verlässliche flexible Zysto-Nephroskopie-Lösung zur sicheren Durchführung von PCNL und komplexen Zystoskopieverfahren – ohne Kompromisse bei der Leistung.

Der integrierte Kamerasensor mit HD-Technologie ermöglicht eine hohe Bildqualität und eine detaillierte Darstellung, auch bei anspruchsvollen Eingriffen. Dies unterstützt eine präzise Beurteilung bei komplexen Zystoskopien sowie optimale Sichtverhältnisse während der perkutanen Nephrolithotomie (PCNL).

Als Einweg-Endoskop bietet das aScope 5 Cysto HD eine gleichbleibend hohe Bild- und Biegeleistung während der Anwendung. Zudem entfallen Verschleiß durch Aufbereitung oder Reparatur. So steht Ihnen jederzeit die Leistung zur Verfügung, die Sie für eine gründliche Untersuchung der Harnblase und Niere sowie für das sichere Entfernen Steinfragmente benötigen.

Die Bildqualität wird zusätzlich durch die Advanced Red Contrast™ (ARC)-Bildgebung unterstützt, die rote Farbtöne in relevanten Bildbereichen gezielt hervorhebt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Bildqualität durch HD-Technologie
- Verbesserte Sichtbarkeit mit Advanced Red Contrast (ARC)
- Vereinfacht den Arbeitsablauf und erleichtert die Tagesplanung
- Hilft, die Kosten zu optimieren
- Einfaches Erfassen, Speichern und Übertragen von Bildern und Videos
- Das weltweit erste Zysto-Nephroskop mit Bioplastik im Griff



GEEIGNET FÜR:

- Flexible Zystoskopie
- Stationäre Zystoskopie zur Durchführung von Konsilen
- PCNL-Verfahren
- ECIRS (endoskopische kombinierte intrarenale Chirurgie)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Ambu aScope 5 Cysto HD		
Artikel-Nr.	602001000 – Umkehrdeflektion 603001000 – Standarddeflektion	
Stückzahl pro Karton	5	
Durchmesser Einführungsbereich	16,2 Fr	
Arbeitskanal	6,6 Fr	
Sichtfeld	120°	
Biegewinkel*	210° nach oben, 120° nach unten	
Kompatibel mit aView 2 Advance		Ja
Kompatibel mit aView 2 Advance		Ja
Kompatibel mit aBox 2	Ja	

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

	4-Wege-Hahn. 50 psi (3,5 bar) Überwurfmutter. Große Bohrung	Hämostaseventil. AccessPLUS Große Bohrung
Artikel-Nr.	K12-11412	K12-11413
Stückzahl pro Karton	50 Stk.	25 Stk.
Bild		



Eine Lösung für
die Endourologie



Ambu® aScope™ 5 Uretero

SINGLE-USE EVERY
CASE, EVERY DAY

Das aScope 5 Uretero erleichtert den reibungslosen Übergang zu Einweg-Ureteroskopen und bietet hochauflösende Bildgebung sowie die Flexibilität, die für bestehende OP-Einrichtungen erforderlich ist. Seine Leistung in wesentlichen Bereichen wie Bildqualität, Manövrierfähigkeit, Drehmomentübertragung, Stabilität und Instrumentengröße macht es zu einer bevorzugten Lösung für ureteroskopische Verfahren.

Das Endoskop kombiniert Robustheit mit hoher Manövrierfähigkeit und verfügt über hervorragende Biegeeigenschaften. So lassen sich auch schwer zugängliche Bereiche erreichen, ohne das Risiko von Endoskopbrüchen. Die hochauflösende Bildgebung unterstützt die Identifikation von Steinen und Steinfragmenten und ist mit den meisten gängigen endourologischen Instrumenten kompatibel.

Das aScope 5 Uretero ist mit den Full-HD-Visualisierungssystemen aBox 2 und aView 2 Advance kompatibel. Beide Systeme lassen sich nahtlos in bestehende OP-Setups integrieren und können entweder eigenständig genutzt oder an vorhandene Visualisierungstürme und externe Monitore angeschlossen werden. Die Lösung ist zudem mit PACS und ePA kompatibel und unterstützt eine reibungslose und effiziente Dokumentation.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht Ihnen den Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen
- Passt sich flexibel an Ihre bestehende OP-Einrichtung an
- Die Kompatibilität mit dem PAC-System und elektronischer Patientenaktensoftware sorgt für eine reibungslose und effiziente Dokumentation
- Keine Reinigung oder Reparatur erforderlich
- Das weltweit erste Ureteroskop mit Bioplastik



GEEIGNET FÜR:


- Flexible Ureteroskopie
- PCNL-Verfahren
- ECIRS (endoskopische kombinierte intrarenale Chirurgie)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Ambu aScope 5 Uretero	
Artikel-Nr.	605001000 - Umkehrdeflektion 604001000 - Standarddeflektion
Stückzahl pro Karton	5
Durchmesser Einführungsbereich	8,1 Fr
Arbeitskanal	3,6 Fr
Durchmesser distales Ende	7,9 Fr
Sichtfeld	90°
Biegewinkel*	270° nach oben und unten
Kompatibel mit aView 2 Advance	Ja
Kompatibel mit aBox 2	Ja

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

FLO 30™ Hämostaseventil	
Artikel-Nr.	K12-12349
Stückzahl pro Karton	25 Stk.

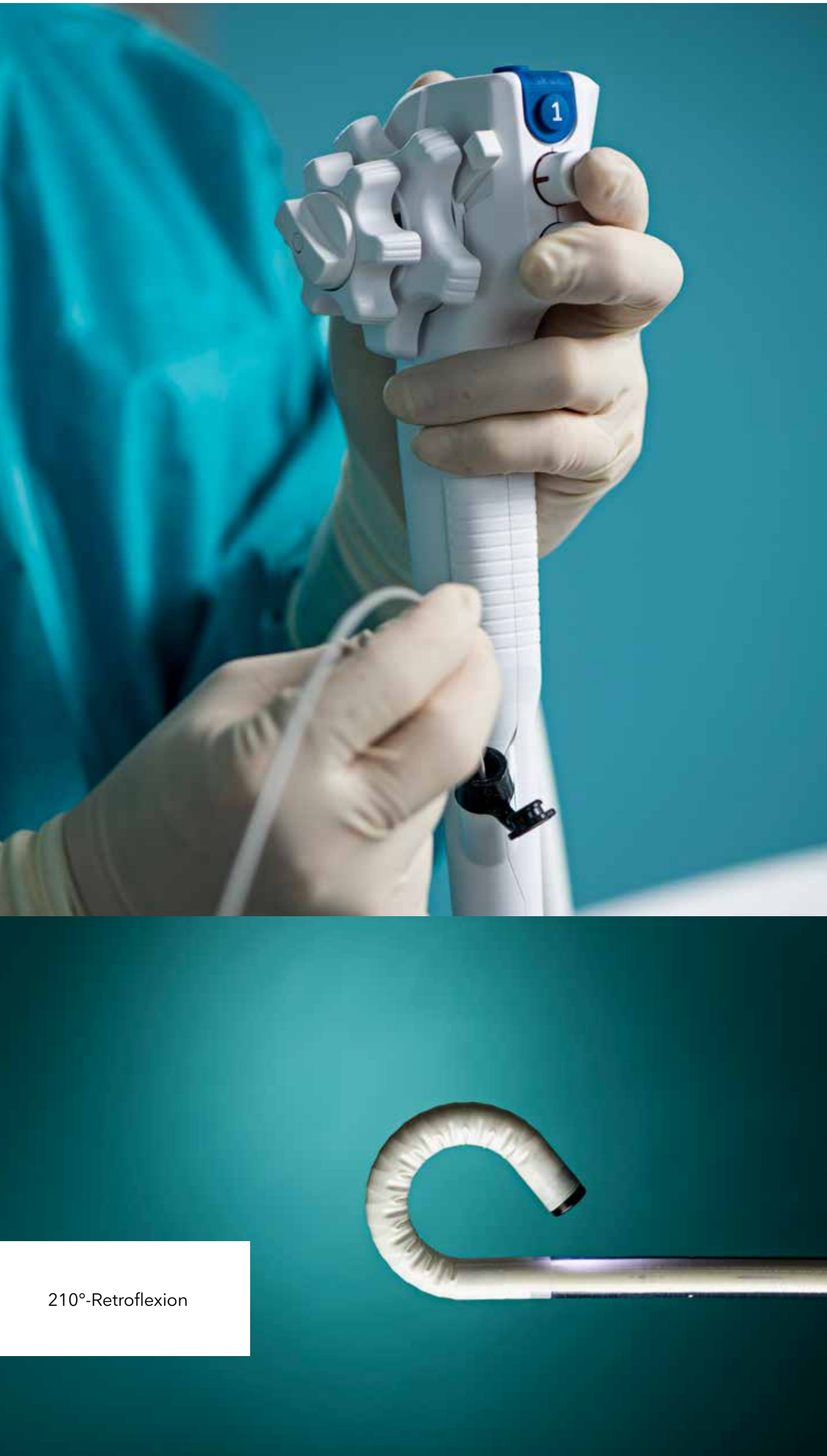

210°-Retroflexion

Ambu® aScope™ Gastro

SCHNELL.
STERIL.
EINWEG.

Ein steriles Einweg-Gastroskop, das für eine Vielzahl endoskopischer Eingriffe im oberen Verdauungstrakt jederzeit verfügbar ist.

Die Ambu aScope Gastro-Lösung bietet ein neues steriles Gastroskop für jeden Patienten in jeder Umgebung. Einfach ein neues Endoskop aus der Verpackung entnehmen, an die kompakte Ambu aBox™ 2 Visualisierungs- und Prozesseinheit mit integriertem Touchscreen-Monitor anschließen – und direkt loslegen.

Die Ambu aScope Gastro-Lösung bietet Ihnen konstante Qualität, Haptik und Leistung – ohne versteckte Kosten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gleichbleibende Qualität, Haptik und Leistung
- Jederzeit und in jeder Umgebung einsatzbereit
- Ein neues steriles Gastroskop für jeden Patienten
- Keine versteckten Kosten
- Gastroskop mit einem Griff mit Bioplastik
- Kompatibel mit Standardzubehör, einschließlich dem ENDOLINQ CO₂-Insufflator



Ideal für ungeplante, dringende und Nachtschichtsituationen sowie für intraoperative Endoskopien im OP.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Ambu aScope Gastro	
Artikel-Nr.	483001000
Stückzahl pro Karton	6
Innendurchmesser Arbeitskanal	2,8 mm/0,11"/8,4 Fr
Sichtfeld	140°
Außendurchmesser der distalen Spitze	9,9 mm/0,39"/29,7 Fr
Abwinkelung (nach oben/unten/links/rechts)	210° / 90° / 100° / 100°
Kompatibel mit aBox 2	Ja



Überlegene Absaugleistung mit 4,2 mm Arbeitskanal

Ambu® aScope™ Gastro Large

A WORLD OF DIFFERENCE WITH 4.2

Das aScope Gastro Large, das weltweit erste Gastroskop mit einem 4,2-mm-Arbeitskanal, erzielt im Vergleich zu den neuesten therapeutischen Gastroskopen mit 3,7-mm-Arbeitskanal einen um etwa 90 % höheren Saugfluss.

Unsere Einweg-Lösung ist immer verfügbar, steril und bietet eine gleichbleibende Performance, ohne Verschleiß. Damit entfällt das Warten, wenn therapeutische Gastroskope im Einsatz sind, aufbereitet werden, sich in Quarantäne befinden, zur Reparatur außer Haus sind oder wenn Aufbereitungsgeräte nicht verfügbar bzw. defekt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Großer 4,2-mm-Arbeitskanal für eine breitere Auswahl an Instrumenten
- Überlegene Absaugleistung im Vergleich zum neuesten 3,7-mm-Gastroskop
- Gleichbleibende Qualität, Haptik und Leistung
- Komfortables Einweg-Produkt
- Kompatibel mit Standardzubehör, einschließlich dem ENDOLINQ™ CO₂-Insufflator
- Das weltweit erste Gastroskop mit Bioplastik im Griff

Entwickelt zur Unterstützung von Blutungen im oberen Gastrointestinaltrakt, Nekrosektomien, Strikturen und zur Entfernung von Fremdkörpern. Ideal für Fälle außerhalb der regulären Arbeitszeit und/oder außerhalb der Endoskopie-Abteilung.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Ambu aScope Gastro Large	
Artikel-Nr.	582001000
Stückzahl pro Karton	6
Innendurchmesser Arbeitskanal	4,2 mm/12,6 Fr/Ch
Sichtfeld	140°
Außendurchmesser der distalen Spitze	11,5 mm/34,5 Fr/Ch
Abwinkelung (nach oben/unten/links/rechts)	210° / 120° / 100° / 100°
Kompatibel mit aBox 2	Ja



aScope Duodeno 2
und aBox 2

Ambu® aScope™ Duodeno 2

EINE STERILE UND EINFACHE
ALTERNATIVE - GENAU DANN,
WENN SIE AM DRINGENDSTEN
BENÖTIGT WIRD

Das Ambu® aScope™ Duodeno 2 ist eine praktische, zuverlässige Option, die Ihr bestehendes Setup ergänzt. Es wurde in Zusammenarbeit mit führenden ERCP-Experten entwickelt, um die geforderten hohen Leistungsstandards zu erfüllen.

Als sterile Lösung bietet das aScope Duodeno 2 eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für Patienten, die so vulnerabel sind, dass selbst ein geringes Risiko nicht vertretbar ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steriles Einweg-Duodenoskop
- Kein Risiko einer Kreuzkontamination des Patienten
- Keine Aufbereitung
- Arbeitsabläufe optimieren
- Ergänzt Ihre bestehende Einrichtung
- Immer verfügbar und einsatzbereit
- Neues ergonomisches Design
- Das radioluzente distale Ende erhöht die Sichtbarkeit während der Fluoroskopie.
- Das weltweit erste Duodenoskop mit Bioplastik im Griff
- Kompatibel mit Standardzubehör, einschließlich dem ENDOLINQ™ CO₂-Insufflator



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Ambu aScope Duodeno 2	Ambu aScope Duodeno 2
Artikel-Nr.	486001000	486004000
Stückzahl pro Karton	1	4
Innendurchmesser Arbeitskanal	4,2 mm/12,6 Fr/Ch	4,2 mm/12,6 Fr/Ch
Sichtfeld	140°	140°
Außendurchmesser der distalen Spitze	13,7 mm	13,7 mm
Abwinkelung (nach oben/unten/links/rechts)	120°/ 90°/ 90°/ 110°	120°/ 90°/ 90°/ 110°
Kompatibel mit aBox 2	Ja	Ja



aView 2 Advance
auf einem aCart
Compact montiert

Der Ambu aView 2 Advance ist in zwei verschiedenen Konfigurationen erhältlich und damit kompatibel mit aktuellen und zukünftigen Ambu Einweg-Endoskopen.



KONFIGURATION 1
Blau-Blau-Grau



KONFIGURATION 2
Grün-Blau-Grau

Ambu® aView™ 2 Advance

FÜR DEN KOMFORT UND LANGFRISTIGEN NUTZEN ENTWICKELT

Der Ambu aView 2 Advance ist ein hochwertiges, tragbares HD-Visualisierungssystem, das für eine Vielzahl von Anwendungen in der Pulmonologie, HNO und Urologie entwickelt wurde. Als Teil der Einweg-Endoskopie-Lösungen von Ambu unterstützt es die Optimierung klinischer Arbeitsabläufe und bietet Krankenhäusern langfristigen Mehrwert. Das System ist leicht und lässt sich problemlos zwischen verschiedenen Stationen transportieren. Es verfügt über einen intuitiven Touchscreen sowie eine nahtlose Konnektivität zu externen Monitoren und ermöglicht so eine einfache Integration in unterschiedliche klinische Umgebungen.

Mit Full-HD-Bildgebung, anpassbaren visuellen Einstellungen sowie der einfachen Erfassung von Bildern und Videos sorgt der aView 2 Advance für gute Sichtbarkeit und unterstützt die sichere Durchführung von Eingriffen. Das zukunftsorientierte Design und die Kompatibilität mit Einweg-Endoskopen tragen dazu bei, Anfangsinvestitionen, laufende Aufbereitungskosten und finanzielle Risiken zu reduzieren. Darüber hinaus erfüllt die Lösung grundlegende Anforderungen an klinische Sicherheit, Interoperabilität, Benutzerfreundlichkeit und Cybersicherheit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexibel und tragbar**
Kompaktes, leichtes Design mit integriertem Griff und Infusionsständerhalterung für einfachen Transport. Klein und einfach zu bewegen, aber langlebig, mit mehr als 2,5 Stunden Akkulaufzeit.
- Intuitiver Plug-and-Play-Einsatz**
Das System lässt sich schnell einrichten und liefert innerhalb weniger Sekunden Live-Bildgebung. Der benutzerfreundliche 12,8-Zoll-Full-HD-Touchscreen bietet einstellbare Farbhelligkeit, Kontrast und Schärfe. Für den flexiblen Einsatz kann das System zudem an einen externen Monitor angeschlossen werden.
- Erweiterte Bildqualität**
Die Full-HD-Auflösung und die adaptive Lichtsteuerung sorgen für eine kontinuierliche Bildoptimierung und liefern scharfe, klare Bilder, die eine sichere Navigation und Erkennung der Anatomie ermöglichen.
- Intelligente Integration für effiziente Arbeitsabläufe**
Rufen Sie Patientendaten über die DICOM Modality Worklist ab und exportieren Sie Bilder einfach auf USB, PACS oder in einen Netzwerkordner.
- Zukunftsorientiertes Design**
Unterstützt drei Kameratechnologien zur Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen Ambu Einweg-Endoskopen. Kontinuierliche Software-Updates sorgen für langfristige Anpassungsfähigkeit.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ambu aView 2 Advance	
Bildschirm	12,8"-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Auflösung	1920 x 1080 (Full-HD)
Akku-Betrieb	Mehr als 2,5 Stunden Akkulaufzeit (je nach verwendetem Visualisierungsgerät)
Speicherkapazität	32 GB inklusive Betriebssystem
Videoausgang	HDMI und 3G-SDI (1080p bei 60 Hz)
Internetoptionen	WLAN (IEEE-Standards 802.11 ac/a/b/g/n) oder Ethernet (RJ45-Anschluss)
USB-Anschlüsse	2 x USB 3.0 Typ A
Eingangsspannung	19 V, 3,43 A DC Eingang
Breite x Höhe x Tiefe	331 mm x 215 mm x 52 mm
Gewicht	2,7 kg
Exportoptionen	USB, PACS oder Netzwerkordner *
Unterstützte Dateiformate	DICOM/MP4 (Video), DICOM/PNG/JPEG* (Bilder)
Systemstartdauer	Live-Bild innerhalb von Sekunden nach dem Einschalten
Bildanpassung	Anpassen von Farbe, Kontrast, Schärfe und Helligkeit

*Netzwerkordner und JPEG-Format erfordern Softwareversion 2.4 oder höher

BESTELLINFORMATIONEN

	Ambu aView 2 Advance Konfiguration 1 ● ● ●	Ambu aView 2 Advance Konfiguration 2 ● ● ●
Artikel-Nr.	405011000EUA1	405011000EUA2
Menge	1	1



Ambu® aBox™ 2

INTUITIVES DESIGN,
HERVORRAGENDE BILDGEBUNG

Die Ambu® aBox™ 2 ist eine intuitive All-in-One-Visualisierungs- und Prozessoreinheit, die Ihren Endoskopie-Arbeitsablauf vereinfacht und verbessert. Mit ihrer kompakten Stellfläche und dem integrierten 12,8-Zoll-Full-HD-Touchscreen vereint sie Lichtquelle, Bildprozessor und Aufnahmegerät in einem einzigen, benutzerfreundlichen Gerät.

Die fortschrittliche Bildverarbeitung, einschließlich adaptiver Lichtsteuerung, bietet eine kontinuierliche Optimierung und stellt sicher, dass Sie sofort klare, detaillierte Bilder aufnehmen. Die aBox 2 lässt sich nahtlos in Krankenhaus-IT-Systeme integrieren und unterstützt eine Reihe von Ambu Einweg-Endoskopen. Sie hilft Ihnen, sich zu konzentrieren, die Dokumentation zu optimieren und einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompaktes All-in-One-Design**

Kombiniert Lichtquelle, Prozessor, Aufnahmegerät und Touchscreen-Display in einer Einheit und kann für eine flexible Verwendung einfach auf einem Wagen, Rack oder Tisch platziert werden.
- Intuitiver Plug-and-Play-Workflow**

Endoskopische Live-Bildgebung innerhalb weniger Sekunden. Die intuitive, neben dem Bild positionierte Touchscreen-Oberfläche ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung und unterstützt Sie dabei, sich auf das Verfahren zu konzentrieren.
- Hochwertige Bildgebung**

Full-HD 12,8-Zoll-Display mit verstellbaren visuellen Einstellungen und adaptiver Lichtsteuerung für klare, optimierte Bilder, die die anatomische Navigation verbessern.
- Nahtlose Datenintegration**

Bilder und Videos aufnehmen und anzeigen und anschließend auf USB, in ein PACS oder in einen Netzwerkordner exportieren.
- Integrierte Unterstützung der Modality Worklist (MWL)**

Importieren Sie tägliche Patientenlisten direkt in das System für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellen Zugriff während des Eingriffs.
- Individuell anpassbares Ansichtserlebnis**

Mit der einstellbaren Bildschirmhöhe, -drehung und -neigung können Sie den idealen Betrachtungswinkel für jede klinische Umgebung einstellen.
- Entwickelt zur Unterstützung der Integration**

Netzwerkfähig für eine sichere, nahtlose Integration in Krankenhaus-IT-Systeme und drahtlose Datenübertragung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ambu aBox 2	
Bildschirm	12,8"-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Auflösung	1920 x 1080 (Full-HD)
Akku-Betrieb	-
Speicherkapazität	128 GB
Internetoptionen	WLAN (IEEE-Standards 802.11 ac/a/b/g/n) oder Ethernet (RJ45-Anschluss)
Eingabeoptionen	3G-SDI, DVI-D (1080 p bei 60 Hz)
Anschlüsse für Triggerausgänge	2 x D-SUB9 und 2 x 3,5-mm-Buchse
USB-Anschlüsse	Vorderseite: 1x USB 3.0; Rückseite: 3x USB 3.0 und 2x USB 2.0 (alle Typ A)
Eingangsspannung	100-240 VAC; 2 A
Breite	330 mm
Höhe	Bildschirm (90°-Winkel): 278 mm Zusammengeklappter Bildschirm: 121 mm
Tiefe	337 mm
Gewicht	8 kg
Exportoptionen	USB, PACS oder Netzwerkordner
Unterstützte Dateiformate	DICOM/MP4 (Video), DICOM/PNG/JPEG* (Bilder)
Systemstartdauer	Live-Bild innerhalb von Sekunden nach dem Einschalten
Bildanpassung	Anpassen von Farbe, Kontrast, Schärfe und Helligkeit

*Netzwerkordner und JPEG-Format erfordern Softwareversion 2.4 oder höher.

BESTELLINFORMATIONEN

Ambu aBox 2	
Artikel-Nr.	505001000EUA2
Menge	1



Wird unmontiert geliefert

Ambu® aCart™ Compact

EIN MODERNER, MOBILER
ENDOSKOPIEWAGEN


Der Ambu aCart™ Compact ist eine moderne mobile Arbeitsstation, die das Einweg-Produktportfolio von Ambu optimal ergänzt. Er bietet praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten und Mobilität ohne viel Platz zu beanspruchen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Höhenverstellbarer Infusionsständer
- Ergonomisch geformter Griff/Kabelaufwickler
- Halter für Monitor/Visualisierungs- und Prozessoreinheit
- Ablagefläche
- Aufbewahrungshaken für zusätzliche Endoskope
- Säulen mit integriertem Kabelkanal
- Aufbewahrungskorb für Zubehör, Kabel oder Produkte für das Atemwegsmanagement
- Untergestell mit vier feststellbaren Doppellenkrollen

Der aCart Compact ist in mehreren Konfigurationen erhältlich, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie können ihn mit zusätzlichen Komponenten erwerben, einschließlich eines optionalen Trenntransformators, oder für eine verbesserte Funktionalität nahtlos an Ihren vorhandenen aCart nachrüsten.

Ambu® aCart™ Compact: Weiteres Zubehör

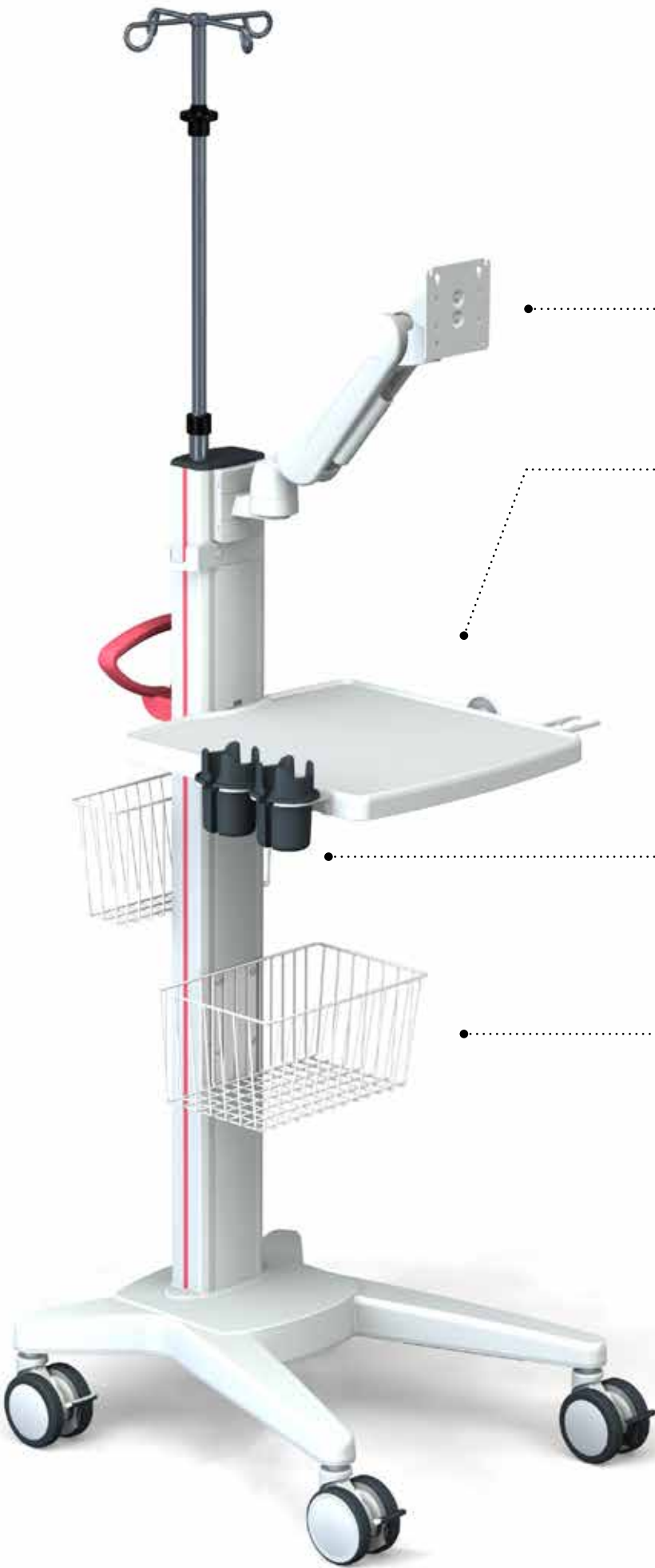

VARIO MOUNT
Zur flexiblen Montage des Ambu aView 2 Advance oder eines externen Monitors

ABLAGEFLÄCHE
Mit vorgebohrten Löchern zur einfachen Montage von Zubehör

UNIVERSALHALTER FÜR ENDOSKOPE
Kann für die aScope 4- und 5-Produktfamilien verwendet werden

KLEINER KORB
Aufbewahrung von Produkten und anderem endoskopischem Zubehör



SCHUBFACH
Kann als Ersatz für das Regal für zusätzliche Lagerkapazität bestellt werden. Mit vorgebohrten Löchern zur einfachen Montage von Zubehör.

BESTELLINFORMATIONEN

	aCart Compact	aCart Compact Vario Halterung	aCart Compact Universal-Endoskophalter	aCart Compact Korb	aCart Compact Ablagefläche	aCart Compact Schublade
Artikel-Nr.	KU.9713.800	KN.1215.991	KN.1245.800	KN.1244.991	KU.9716.991	KN.1171.903
Stückzahl pro Karton	1	1	1	1	1	1



Bereits vormontiert

IHR EQUIPMENT IST STETS GRIFFBEREIT

Ambu® aCart™ Compact (E-Box)

- Der aCart Compact-Endoskopiewagen bietet praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ihre Endoskopieausrüstung
- Ablageflächen für medizinische Geräte
- Aufbewahrungskorb und Schubfach für Endoskopiezubehör
- Halterungen für Sterilwasser- und CO₂-Flaschen
- Einweg-Endoskophalter
- Aufbewahrungshaken für zusätzliche Einweg-Endoskope
- Verstellbarer Monitorhalter (konform mit VESA-Montagestandards)
- Endoskophalter und runde Kabelhalterung für effizientes Kabelmanagement
- Stromversorgung Ihrer Geräte durch eine 4-fache IEC-Steckdosenleiste im praktischen Schubfach

NACHRÜSTUNG IHRES ACART COMPACT

Alle Zubehörteile, die Sie benötigen, um Ihren aktuellen aCart Compact in eine aCart Compact E-Box umzuwandeln

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN SIND:

- Endoskophalter
- Schubfach
- Zwei CO₂-Flaschenhalterungen
- Schaltkasten und 4-fach IEC-Steckdosenleiste
- Wasserflaschenhalterung

Ambu® aCart™ Compact (Transformer)

FÜR EINRICHTUNGEN MIT BESONDEREN ANFORDERUNGEN IN BEZUG AUF DIE ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Als Alternative zur E-Box erhältlich, um eine galvanische Trennung sicherzustellen. Sechs Steckdosen ermöglichen das gleichzeitige Einschalten aller Geräte, während die Stromkreise getrennt und abgesichert werden.



Bereits vormontiert

BESTELLSPEZIFIKATIONEN E-BOX

	aCart Compact (E-Box mit US-Stromkabel)	aCart Compact EU-Stromkabel	aCart Compact CH-Stromkabel	aCart Compact Vario Halterung	aCart Compact Zubehör-Kit (mit US-Stromkabel)
Artikel-Nr.	KU.9713.800	ZV.9809.799	ZV.9798.799	HA.3000.991	KN.1052.991
Stückzahl pro Karton	1	1	1	1	1

BESTELLSPEZIFIKATIONEN FÜR TRANSFORMATOR

	aCart Compact (Transformator mit EU-Stromkabel)	aCart Compact EU-Stromkabel	aCart Compact CH-Stromkabel	aCart Compact Vario Halterung
Artikel-Nr.	KN.1045.800	ZV.9809.799	ZV.9798.799	HA.3000.991
Stückzahl pro Karton	1	1	1	1



Ambu® aCart™ Compact (Konfigurationen)



EINE LÖSUNG FÜR ALLE ATEMWEGSBEDÜRFNISSE

aCart Compact mit aView
2 Advance, aScope 4 Broncho
Slim und VivaSight DLT



IHRE TRAGBARE LÖSUNG FÜR DIE UROLOGIE

aCart Compact (E-Box) mit
aBox 2 und aScope 5 Uretero



IHRE UMFASSENDE GI-ENDOSKOPIE-LÖSUNG

aCart Compact (E-Box)
mit aBox 2, aScope Gastro,
externem Monitor, CO₂-Insufflator,
sterilen Wasserflaschen und CO₂-
Zylinder





Ambu® aCart™ Plus

EINE VERLÄSSLICHE,
KOMFORTABLE ARBEITSSTATION

Für medizinische Fachkräfte, die Eingriffe im OP, in der Bronchoskopie- oder anderen Endoskopie-Abteilungen durchführen, ist der Ambu aCart Plus ein stabiler, komfortabler Endoskopiewagen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zwei Säulen mit integrierten Kabelkanälen
- Monitorhalterung
- Höhenverstellbarer Endoskophalter
- Schiene für medizinisches Zubehör
- Zwei CO₂-Flaschenhalterungen
- Ausreichend Ablagefläche
- Sterilwasserflaschenhalter
- Untergestell mit vier feststellbaren Doppellenkrollen



aCart Plus mit aBox 2, aScope Gastro, externem Monitor, CO₂-Insufflator, CO₂-Flasche und steriler Wasserflasche.

BESTELLINFORMATIONEN

aCart Plus	
Artikel-Nr.	KU.9740.800
Stückzahl pro Karton	1



Wir erforschen ständig neue Wege, um den ökologischen Fußabdruck unserer Produkte zu reduzieren und Krankenhäusern dabei zu helfen, ihre Gesamtauswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

Unser kreislaforientierter Ansatz bei der Produktinnovation schafft einen Rahmen für fortlaufende Forschung zu Rücknahme- und Recyclinglösungen, die unsere Produkte vom Müll fernhalten. Gleichzeitig trägt er zur Reduzierung von Abfall durch angepasste Verpackungen bei und ermöglicht die Integration erneuerbarer Materialien in unsere Produktgestaltung. Ein konkretes Beispiel für unser Engagement ist die Einführung von Bioplastik in die Griffe unserer Einweg-Endoskope.

JOIN
THE
CIRCLE

SICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT IN EINKLANG BRINGEN

Unser Ziel bei Ambu war immer klar: Lösungen zu überdenken, um Leben zu retten und die Patientenversorgung zu verbessern. Unsere Einweg-Endoskope eliminieren das Risiko einer Kreuzkontamination und bieten sterile, sofort einsatzfähige Geräte für jeden Eingriff. Sie bestehen aus hochwertigen Kunststoffen, die eine schonendere und weniger invasive Behandlung für Patienten ermöglichen. Wir sind uns jedoch der Umweltauswirkungen unserer Produkte bewusst und arbeiten kontinuierlich daran, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Unser Ziel ist es, in jeder Phase des Produktlebenszyklus einen Kreislaufansatz anzuwenden, von Forschung und Entwicklung bis hin zu Design, Herstellung und Entsorgung. Dies stellt sicher, dass unsere Einweg-Lösungen Sicherheit, klinische Leistung und Nachhaltigkeit in Einklang bringen.

AKTUELLE INITIATIVEN

Zirkuläre Produkte

- Bioplastik in allen Endoskop-Griffen
- 95 % der neuen Produkte, die nach 2025 auf dem Markt eingeführt werden, sollen PVC-frei sein

Zirkuläre Verpackungen

- Primärverpackung aus Bioplastik für mengenreiche Produkte

Recycling-Programm

- Plan zur Ausweitung des Ambu Recircle-Programms in den Fokusbörsen

UNSER ZIRKULÄRER ANSATZ FÜR PRODUKTINNOVATION



Sicherere Materialien

Auswahl sichererer Materialien, um Schadstoffe zu vermeiden und Mensch und Umwelt besser zu schützen.



Innovative und nachhaltige Rohstoffe

Reduktion unserer Abhängigkeit von fossilen Kunststoffen durch den Einsatz alternativer Materialien wie Bioplastik mit geringerem CO₂-Fußabdruck.



Zirkuläres Produktdesign

Wir erforschen Möglichkeiten, Produkte so zu gestalten, dass sie von Anfang an leichter recycelbar sind und die verwendeten Materialien während ihres gesamten Lebenszyklus ihren maximalen Wert behalten.



Zirkuläre Verpackung und Logistik

Verpackungsmaterialien reduzieren und Bioplastik in unseren Primärverpackungen verwenden. Wir überdenken die Produktlogistik, indem wir Elektrofahrzeuge einsetzen und die Rücknahme oder das Recycling von Produkten in der Nähe bestehender Standorte ermöglichen.



Fertigungskaskaden

Wir erkunden Möglichkeiten, Material, Energie und Wasser einzusparen und wiederzuverwenden, um mit weniger mehr zu erreichen.



Systeminnovation

Gesundheits- und Abfallsysteme durch Pilotprojekte und Partnerschaften neu gestalten, um in wichtigen regionalen Märkten effektive Rücknahme- und Recyclingprogramme zu etablieren.

FAKT 1

Ambu-Endoskope sind die ersten weltweit, die Bioplastik verwenden.

Während die Qualität und Leistung unserer Endoskope unverändert bleiben, stellt das in den Griffen verwendete Bioplastik eine nachhaltigere Rohstoffquelle dar als rein fossilbasierter Kunststoff.

3 FAKTEN ÜBER AMBU ENDOSKOP- UND BIOPLASTIK

FAKT 2

Bioplastik hat einen geringeren ökologischen Fußabdruck.

Das Bioplastik, das wir in unseren Einweg-Endoskop-Griffen verwenden, ist eine Mischung aus fossilen Rohstoffen und biobasierten Rohstoffen der zweiten Generation (wie gebrauchtem Speiseöl). Dieses Bioplastik emittiert 70 %* weniger Kohlenstoff als rein fossiler Kunststoff.

FAKT 3

Die Einführung von Bioplastik ist nur der erste von vielen Schritten in unserer Nachhaltigkeitsstrategie.

Alle unsere Einweg-Endoskop-Griffe enthalten Bioplastik. Wir werden diese Initiative weiter vorantreiben und die Integration von Bioplastik in weiteren Komponenten unserer Endoskope ermöglichen.

*Basierend auf Cradle-to-Gate-Lebenszyklusanalysen des Rohstoffs vom Lieferanten. In den LCAs wurde ABS-Kunststoff, der zu 100 % aus fossilen Rohstoffen hergestellt wurde, mit unserem neuen ABS-Bioplastik verglichen (der zu 50 % aus biobasierten Rohstoffen der zweiten Generation und zu 50 % aus fossilen Rohstoffen besteht). (Diese Reduktion bezieht sich nur auf den CO₂-Fußabdruck des ABS-Kunststoffs im Griff, nicht auf den gesamten Lebenszyklus des Endprodukts.)



BESTELLNUMMERN

Ambu® aScope™ 5 Broncho / Ambu® aScope™ 5 Broncho Sampler Set

Artikelnummer	Produkt	Menge
624001000	Ambu® aScope™ 5 Broncho 2.7/1.2	5
620001000	Ambu® aScope™ 5 Broncho 4.2/2.2	5
621001000	Ambu® aScope™ 5 Broncho HD 5.0/2.2	5
622001000	Ambu® aScope™ 5 Broncho HD 5.6/2.8	5
620002000	Ambu® aScope™ 5 Broncho 4.2/2.2 Sampler Set	5
621002000	Ambu® aScope™ 5 Broncho HD 5.0/2.2 Sampler Set	5
622002000	Ambu® aScope™ 5 Broncho HD 5.6/2.8 Sampler Set	5

Ambu® aScope™ 4 Broncho / Ambu® aScope™ 4 Broncho Sampler Set

Artikelnummer	Produkt	Menge
476001000	Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim	5
477001000	Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular	5
478001000	Ambu® aScope™ 4 Broncho Large	5
477501000	Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular Sampler Set	5
478501000	Ambu® aScope™ 4 Broncho Large Sampler Set	5
480500000	Ambu aScope BronchoSampler™ 60 ml, Ersatz-Probenbehälter	10

Ambu® VivaSight™ 2

Artikelnummer	Produkt	Menge
412351000	Ambu® VivaSight™ 2 DLT Kit 35 Fr - LINKS	1
412371000	Ambu® VivaSight™ 2 DLT Kit 37 Fr - LINKS	1
412391000	Ambu® VivaSight™ 2 DLT Kit 39 Fr - LINKS	1
412411000	Ambu® VivaSight™ 2 DLT Kit 41 Fr - LINKS	1
412701000	Ambu® VivaSight™ 2 SLT Kit - 7,0 mm	1
412751000	Ambu® VivaSight™ 2 SLT Kit - 7,5 mm	1
412801000	Ambu® VivaSight™ 2 SLT Kit - 8,0 mm	1
412709000	Ambu® VivaSight™ 2 SLT + EBB Kit - 7,0 mm, 9 Fr	1
412759000	Ambu® VivaSight™ 2 SLT + EBB Kit - 7,5 mm, 9 Fr	1
412809000	Ambu® VivaSight™ 2 SLT + EBB Kit - 8,0 mm, 9 Fr	1
412900000	Ambu® VivaSight™ Endobronchialblocker-Tubus	1

Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo

Artikelnummer	Produkt	Menge
510001000	Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim	5
512001000	Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo Intervention	5

Ambu® aScope™ 5 Cysto / Ambu® aScope™ 4 Cysto

Artikelnummer	Produkt	Menge
600001000	Ambu® aScope™ 4 Cysto - Umkehrdeflektion	5
601001000	Ambu® aScope™ 4 Cysto - Standarddeflektion	5
602001000	Ambu® aScope™ 5 Cysto HD - Umkehrdeflektion	5
603001000	Ambu® aScope™ 5 Cysto HD - Standarddeflektion	5

Ambu® aScope™ 5 Uretero

Artikelnummer	Produkt	Menge
605001000	Ambu® aScope™ 5 Uretero - Umkehrdeflektion	5
604001000	Ambu® aScope™ 5 Uretero - Standarddeflektion	5

Ambu® aScope™ 4 Gastro Large / Ambu® aScope™ 4 Gastro

Artikelnummer	Produkt	Menge
582001000	Ambu® aScope™ Gastro Large	6
483001000	Ambu® aScope™ Gastro	6

Ambu® aScope™ Duodeno 2

Artikelnummer	Produkt	Menge
48600100	Ambu® aScope™ Duodeno 2	1
486004000	Ambu® aScope™ Duodeno 2	4

Ambu® Visualisierungs-Systeme

Artikelnummer	Produkt	Menge
405011000EUA1	Ambu® aView™ 2 Advance Visualisierungs- und Prozessoreinheit (Konfiguration 1 ist Blau-Blau-Grau)	1
405011000EUA2	Ambu® aView™ 2 Advance Visualisierungs- und Prozessoreinheit (Konfiguration 1 ist Grün-Blau-Grau)	1
505001000EUA2	Ambu® aBox™ 2 Visualisierungs- und Prozessoreinheit	1

Ambu® Mobiler Endoskopiewagen

Artikelnummer	Produkt	Menge
KU.9713.800	Ambu® aCart™ Compact	1
KN.1044.800	Ambu® aCart™ Compact (E-Box mit US-Stromkabel)	1
KN.1045.800	Ambu® aCart™ Compact Transformator (mit EU-Stromkabel)	1
HA.3000.991	Ambu® aCart™ Compact Vario Halterung	1
ZV.9860.799	Ambu® aCart™ Compact UK-Stromkabel	1
KN.1052.991	Ambu® aCart™ Compact Zubehör-Kit mit US-Stromkabel)	1
KU.9740.800	Ambu® aCart™ Plus	1



BAHNBRECHENDE INNOVATIONEN, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

Seit 1937 setzt Ambu Maßstäbe mit wegweisenden Lösungen, die die Patientenversorgung nachhaltig verbessern. Unsere Innovationen sprechen für sich: Ambu entwickelte den weltweit ersten selbstexpandierenden Beatmungsbeutel – und brachte das erste Einweg-Endoskop auf den Markt. Zwei Meilensteine, die die moderne Medizintechnik nachhaltig geprägt haben.

Heute arbeiten wir immer noch mit führenden medizinischen Experten zusammen, um neue Standards zu setzen – neu zu denken und die Zukunft aktiv zu gestalten.

Millionen von Patienten und medizinischen Fachkräften vertrauen auf unsere Lösungen für die Endoskopie, Anästhesie und Patientenüberwachung, wenn es um Effizienz, Sicherheit und Leistung geht. Unsere Verantwortung für jede Phase des Produktlebenszyklus ermöglicht es uns, schnell auf sich ändernde Bedürfnisse zu reagieren, eine zuverlässige Versorgung mit Produkten aufrechtzuerhalten und volle Transparenz gegenüber den Kunden zu gewährleisten.

An unserem Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark sowie in ganz Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum engagieren sich weltweit über 5000 Ambu-Mitarbeitende dafür, stets mehr zu leisten als erwartet wird.

Ambu - Care beyond expectations.

Weitere Informationen finden Sie unter
<https://www.ambu.de/endoskopie/einweg-endoskopie>



Ambu GmbH
Steinkopfstr. 4
61231 Bad Nauheim
[ambu.de](https://www.ambu.de)