

Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim 3.8/1.2

Das flexible Einweg-Bronchoskop



Produkteigenschaften

- Sofortige Verfügbarkeit
- Kein Kreuzkontaminationsrisiko
- Kosteneffizient
- Leichte Einsetzbarkeit
- Klare, scharfe Bilder
- Leichte und einfache Navigation

Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim 3.8/1.2

Einweg. Neue Möglichkeiten.

Das Einweg-Konzept des aScope 4 Broncho Systems löst ein für alle Mal die Verfügbarkeitsprobleme und vereinfacht das Aufbauen und Einrichten des Equipments vor der Anwendung. Komplizierte Reinigungsverfahren werden überflüssig und das Risiko von Kreuzkontaminationen wird reduziert. Das aScope 4 Broncho ist einzeln steril verpackt. Es bietet dadurch eine erhöhte Patientensicherheit sowie optimierte Arbeitsabläufe.

Das aScope 4 Broncho Slim ermöglicht hochwertige Bronchoskopien für ein breites Spektrum an Verfahren. Mit dem tragbaren Ambu® aView™ Monitor liefert Ihnen das aScope 4 Broncho Slim eine klare Sicht auf nahe Strukturen sowie auf distal liegende Bereiche der Bronchien. Die klaren, scharfen Bilder und die adaptive Lichtsteuerung erleichtern die Identifizierung von Lungenstrukturen und das Navigieren durch den Bronchialbaum.

Die großen Biegewinkel und die präzise Bewegung der Spitze des aScope 4 Broncho Slim ermöglichen die reibungslose Navigation in alle Lungenabschnitte. Das hochwertige Handstück besitzt eine abgerundete, geriffelte Oberfläche für einen komfortablen Halt während des Verfahrens. Durch sein leichtes und ergonomisches Design ist das aScope 4 Broncho Slim besonders anwenderfreundlich.

Das aScope 4 Broncho Slim besitzt einen geringen Außendurchmesser von lediglich 3,8 mm. Es ist die ideale Lösung für ein breites Spektrum bronchoskopischer Verfahren: von der Intubation bis hin zur Platzierung und Kontrolle von Doppellumentuben und Bronchusblockern im OP. Durch sein ultraschlankes Design eignet sich das aScope 4 Slim hervorragend für den Einsatz bei Endotrachealtuben ≥ 5 mm und Doppellumentuben ≥ 35 Fr.

Spezifikationen

| Optisches System | |
|--|---------------------------------|
| Blickfeld | 85° |
| Blickrichtung | 0° (Sicht nach vorn) |
| Schärfbereich der Optik | 6 - 50 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Intubationsbereich | |
| Biegbare Sektion | 180° nach oben, 180° nach unten |
| Durchmesser Einführungsschlauch | 3,8 mm (0,15") |
| Durchmesser distales Ende | 4,2 mm (0,16") |
| Maximaler Durchmesser des Intubationsbereichs | 4,3 mm (0,17") |
| Minimale Endotrachealtubusgröße (Innendurchmesser) | 5,0 mm |
| Minimale Doppellumentubusgröße (Innendurchmesser) | 35 Fr |
| Arbeitslänge | 600 mm (23,6") |
| Kanal | |
| Durchschnittlicher Innendurchmesser | 1,2 mm (0,047") |
| Mindestbreite des Instrumentenkanals | 1,2 mm (0,047") |
| Absauganschluss | |
| Innendurchmesser des Verbindungsschlauchs | Ø 7 mm +/- 1 mm |
| Betriebsumgebung, Lagerung & Transport | |
| Temperatur bei Transport | 10 ~ 40 °C (50 bis 104 °F) |
| Temperatur in Betriebsumgebung | 10 ~ 40 °C (50 bis 104 °F) |
| Temperatur während Lagerung | 10 ~ 25 °C (50 bis 77 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30 ~ 85% |
| Atmosphärischer Druck | 80 ~ 109 kPa |
| Höhe | ≤2000 m |
| Sterilisation | |
| Sterilisationsverfahren | ETO |



Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim und Ambu® aView™




Das ergonomische und leichte Handstück bietet optimalen Halt und Griffkomfort

Bestellinformationen

| Artikel-Nr. | Anzahl (Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim 3.8/1.2) |
|-------------|---|
| 476001000 | 5 |

Einführungsvorrichtung

Vereinfacht das Einführen von Luer-Lock-Spritzen und weichem Endoskopiezubehör in den Arbeitskanal

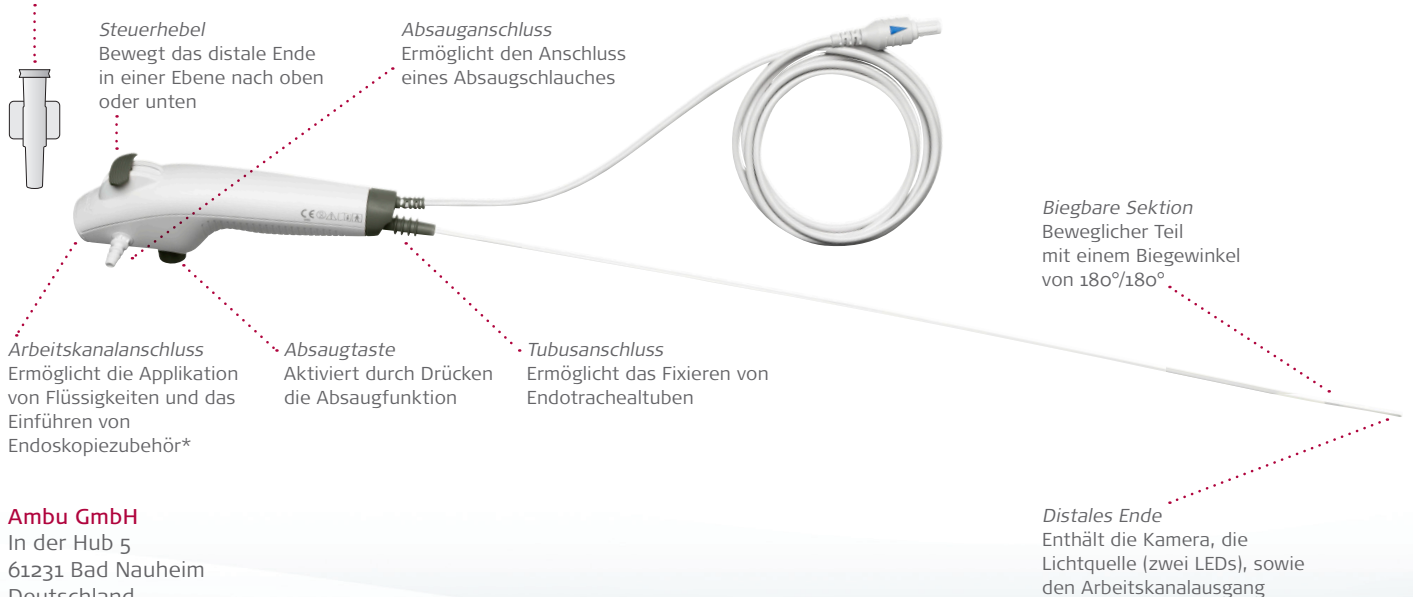

Ambu GmbH

In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. +49 60 32/92 50-0
Fax +49 60 32/92 50-200
www.ambu.de

*Es besteht keine Garantie, dass Endoskopiezubehör, welches ausschließlich aufgrund der Mindestbreite des Arbeitskanals ausgewählt wurde, kompatibel ist.