

Einzigartiges, geschlossenes
Probeentnahmesystem

Ambu® aScope BronchoSampler™

Entdecken Sie eine Weltneuheit in der Probenentnahme während der Bronchoskopie. Der aScope BronchoSampler stellt eine kompakte Probenentnahmelösung dar, die speziell für das Ambu® aScope™ 4 Broncho entwickelt wurde.

Vereinfachtes Verfahren zur Probengewinnung

Als einzigartiges, zweckoptimiertes System bietet der aScope BronchoSampler eine gesteigerte Workflow-Effizienz, da es auch allein arbeitendem Fachpersonal ermöglicht, bronchoskopische Probenentnahmen im Rahmen einer bronchoalveolaren Lavage (BAL) oder bronchialen Waschung (BW) durchzuführen – angefangen beim Systemsetup bis hin zur Probenentnahme.

Ein weiteres Merkmal des aScope BronchoSampler ist der Vakuum-Bypass, der die Verfahren zusätzlich vereinfacht, indem er es Ihnen ermöglicht, ohne einen Schlauchwechsel zwischen Absaugen und Probenentnahme zu wechseln.

Weniger verlorene und kontaminierte Proben

Der aScope BronchoSampler ist für die einmalige Verwendung konzipiert und ein steriles, geschlossenes System. Dies reduziert die Gefahr von Probenverlusten und garantiert eine hohe Probenqualität über das gesamte Verfahren hinweg. Durch die Minimierung des Risikos einer Kontamination der Probe oder Exposition unterstützt der aScope BronchoSampler die repräsentative Probennahme und zeitnahe Diagnose sowie die Sicherheit von Patienten und Fachpersonal.

Innovatives, integriertes System

Der aScope BronchoSampler enthält alle wichtigen Komponenten, die Sie benötigen, damit Sie BAL- und BW-Verfahren effektiv und effizient durchführen können und er ist immer einsatzbereit, wenn Sie es sind.



aScope BronchoSampler


– alles in einem sterilen, tragbaren und vorverpackten Kit

Deckelverschluss zum Verhindern einer Probenkontamination

Klick-Sperrmechanismus zum Lösen der Verschlussverbindung und Entfernen des Probenbehälters

Strömungsschalter für den Wechsel zwischen Absaugen und Probenentnahme

Schnittstelle für einen abgedichteten Anschluss

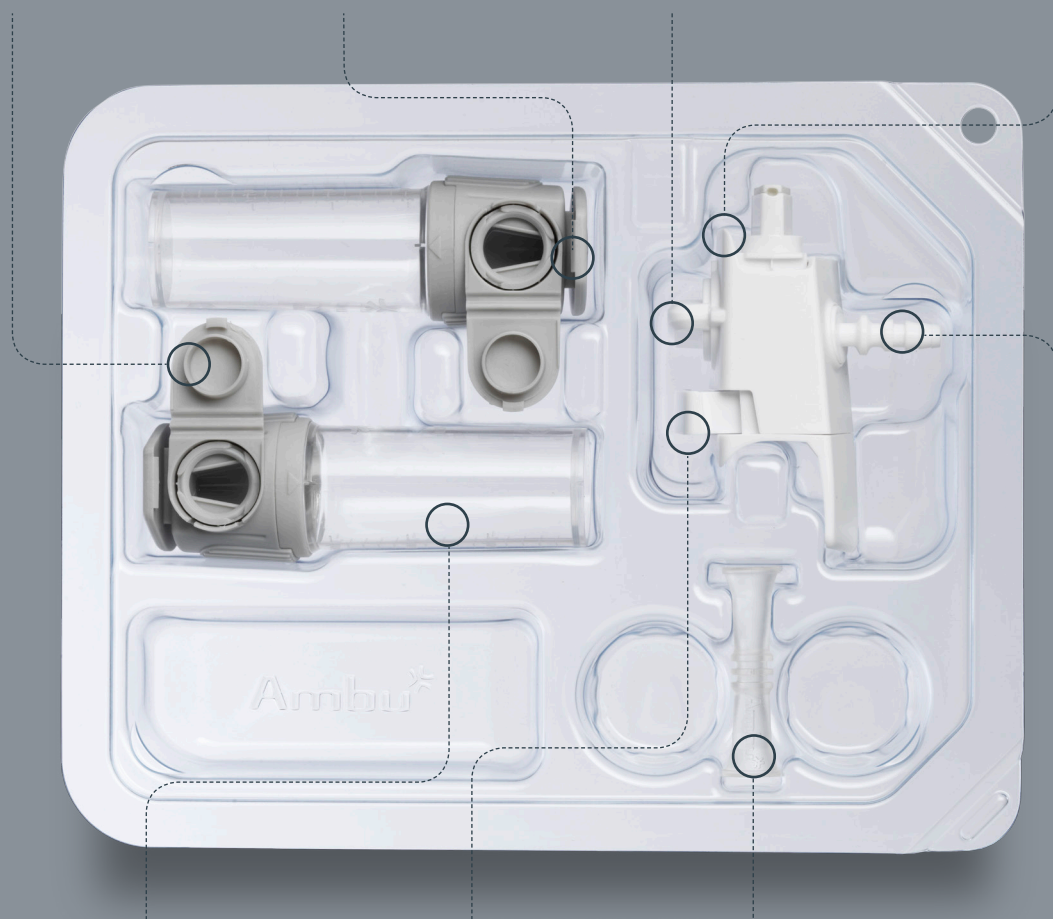

Transparenter Probenbehälter für die einfache Überprüfung von Probenvolumen und -textur

Arretierung der Probennehmerbrücke an das aScope 4 Broncho

Absaugadapter zur Verwendung verschiedener Absaugsysteme

Absauganschluss zum Anschluss an verschiedene Absaugsysteme

Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung	VE*
480 200 000	aScope BronchoSampler, Probenentnahmesystem (2x30 ml)	5
480 300 000	aScope BronchoSampler Probenbehälter, einzeln (30 ml)	10

*kleinste Versandeinheit

Ambu GmbH
 In der Hub 5
 61231 Bad Nauheim
 Deutschland
 Tel. +49 60 32/92 50-0
 Fax +49 60 32/92 50-200
www.ambu.de